

cera**motion**®
One Touch



*Paste
2D & 3D...*

Semplici. Rapide. Estetiche.

Paste per la finalizzazione estetica
delle strutture in zirconia monolitica

D
DENTAURUM

Semplici. Rapide. Estetiche.

Le ceraMotion® One Touch sono speciali paste 2D e 3D create per la finalizzazione e la caratterizzazione estetica di riabilitazioni protesiche monolitiche in zirconia e disilicato di litio.



- Semplice e rapida gestione del lavoro grazie a paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso.
- Cofano speciale per la semplice produzione di riabilitazioni protesiche estetiche in ceramica integrale.
- Massima estetica grazie alla precisione cromatica delle paste con effetto 3D.
- Possibili piccole correzioni di forma e fissaggio dei punti di contatto.

Cos'è la ceraMotion® One Touch?

Le paste ceraMotion® One Touch vengono prodotte utilizzando uno speciale processo ad alta tecnologia.

La granulometria delle paste è stata regolata per adattarsi ai requisiti della tecnica di pittura (2D) e per dare la possibilità di progettare una morfologia individuale nella zona incisale (3D).

La nuova composizione delle paste permette l'uniforme bagnabilità della superficie di strutture in ceramica integrale. Attraverso l'effetto tissotropico si ottiene una perfetta adesione superficiale nonché la possibilità di gestire minime stratificazioni.

Le paste ceraMotion® One Touch sono tutte traslucenti e quindi permettono di trasmettere l'effetto dinamico della luce del materiale di cui è composta la struttura. Forniscono, inoltre, al restauro anatomico la naturale fluorescenza.




Vantaggi delle paste ceraMotion® One Touch.

Paste ceraMotion® 2D

La piccola dimensione delle particelle combinata con la traslucenza delle masse consente l'ottimizzazione cromatica del dente, del valore di luminosità nonché della profondità dei restauri in ceramica integrale.

- La traslucenza delle paste 2D supporta le dinamiche della luce.
- La fluorescenza delle paste è stata adeguata in modo da dare anche ai restauri in ceramica integrale un aspetto naturale.

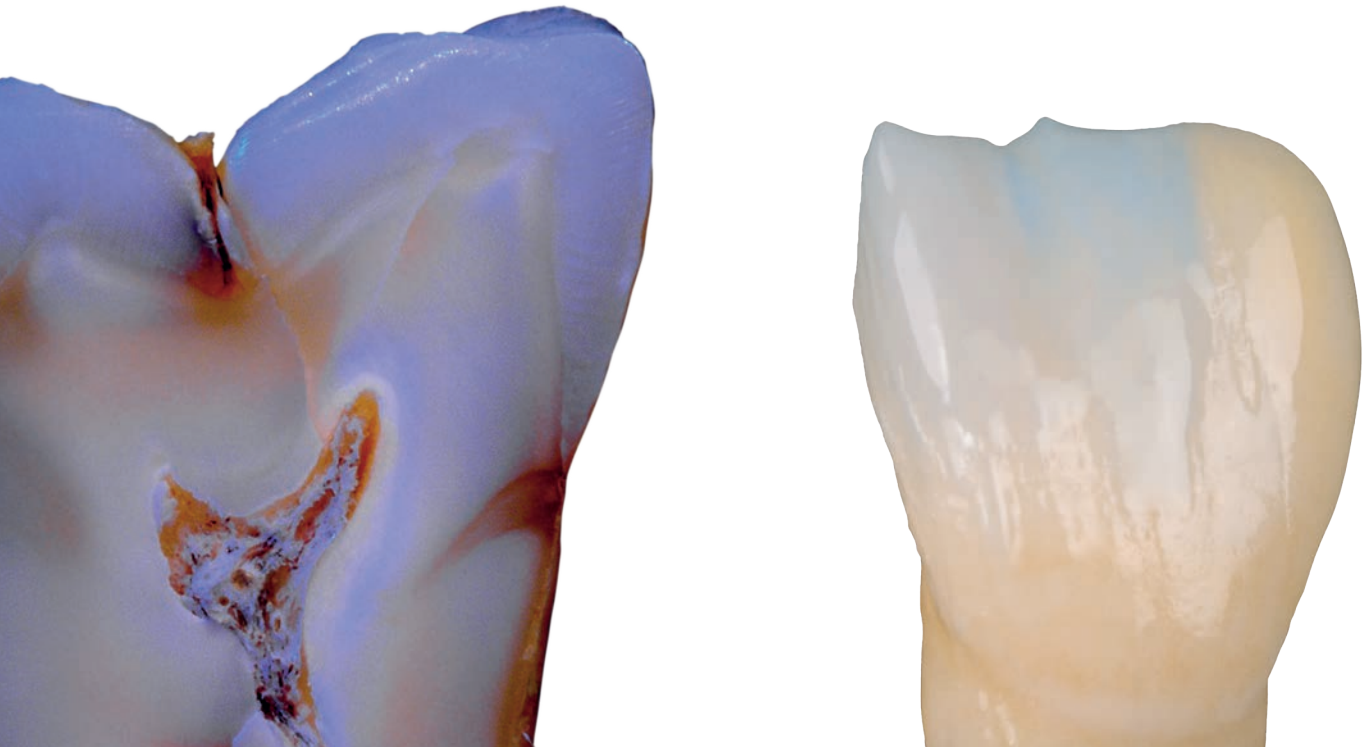

Paste ceraMotion®3D

- L'unione di particelle più grandi con una pasta tissotropica permette l'ottimale modellazione delle zone incisali e la possibilità di apportare punti di contatto.
- La stabilità termica delle paste 3D consente di mantenere la desiderata morfologia.
- La trasparenza e l'opalescenza degli incisali 3D pronti all'uso permettono di ottenere effetti di profondità conferendo al lavoro un aspetto vivo.
- La fluorescenza delle paste è stata adattata a quella del dente naturale.



I prodotti ceraMotion® One Touch.

Il cofano ceraMotion® One Touch contiene 16 masse singole nonché liquidi speciali e accessori. I prodotti chiave sono le masse in pasta 2D e 3D che possiedono grande precisione cromatica. Sono state progettate per restauri in ceramica integrale e restauri con un minimo cut-back.

Sono compatibili con ossido di zirconio (ad es. Nacera® Pearl Preshaded o Nacera® Pearl Multishade) o disilicato di litio. Tutti gli elementi contenuti nel cofano sono disponibili anche singolarmente.



* Nacera® è un marchio registrato di Doceram Medical GmbH.

Il cofano ceraMotion® One Touch (REF 250-800-70).

ceraMotion®
One Touch

Descrizione	Q.tà	REF
PASTE 2D		
Pasta ceraMotion® 2D Body A	3 g	250-306-03
Pasta ceraMotion® 2D Body B	3 g	250-307-03
Pasta ceraMotion® 2D Body C	3 g	250-308-03
Pasta ceraMotion® 2D Body D	3 g	250-309-03
Pasta ceraMotion® 2D bianca	3 g	250-310-03
Pasta ceraMotion® 2D grigia	3 g	250-311-03
Pasta ceraMotion® 2D miele	3 g	250-312-03
Pasta ceraMotion® 2D blu	3 g	250-313-03
Pasta ceraMotion® 2D viola	3 g	250-314-03

PASTE 3D		
Pasta ceraMotion® 3D I2	3 g	250-300-03
Pasta ceraMotion® 3D lumin	3 g	250-301-03
Pasta ceraMotion® 3D neutra	3 g	250-302-03
Pasta ceraMotion® 3D opal blu	3 g	250-303-03
Pasta ceraMotion® 3D opal grigia	3 g	250-304-03
Pasta ceraMotion® 3D opal miele	3 g	250-305-03

LIQUIDI		
Liquido per diluire	10 ml	254-012-01
Liquido rigenerante	10 ml	254-014-01
GLASURA		
ceraMotion® Zr Pasta Glaze	3 g	250-271-03



Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Assistenza tecnica: 334 6000838 | E-Mail: ceramica@dentauro.it
Assistenza commerciale: 051 862580 | E-Mail: ordini@dentauro.it

Data dell'informazione: 02/19
Soggetto a variazione



shop.dentauro.it



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Fano (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentauro.it | info@dentauro.it