




S-A-M

CATALOGO PRODOTTI 2022

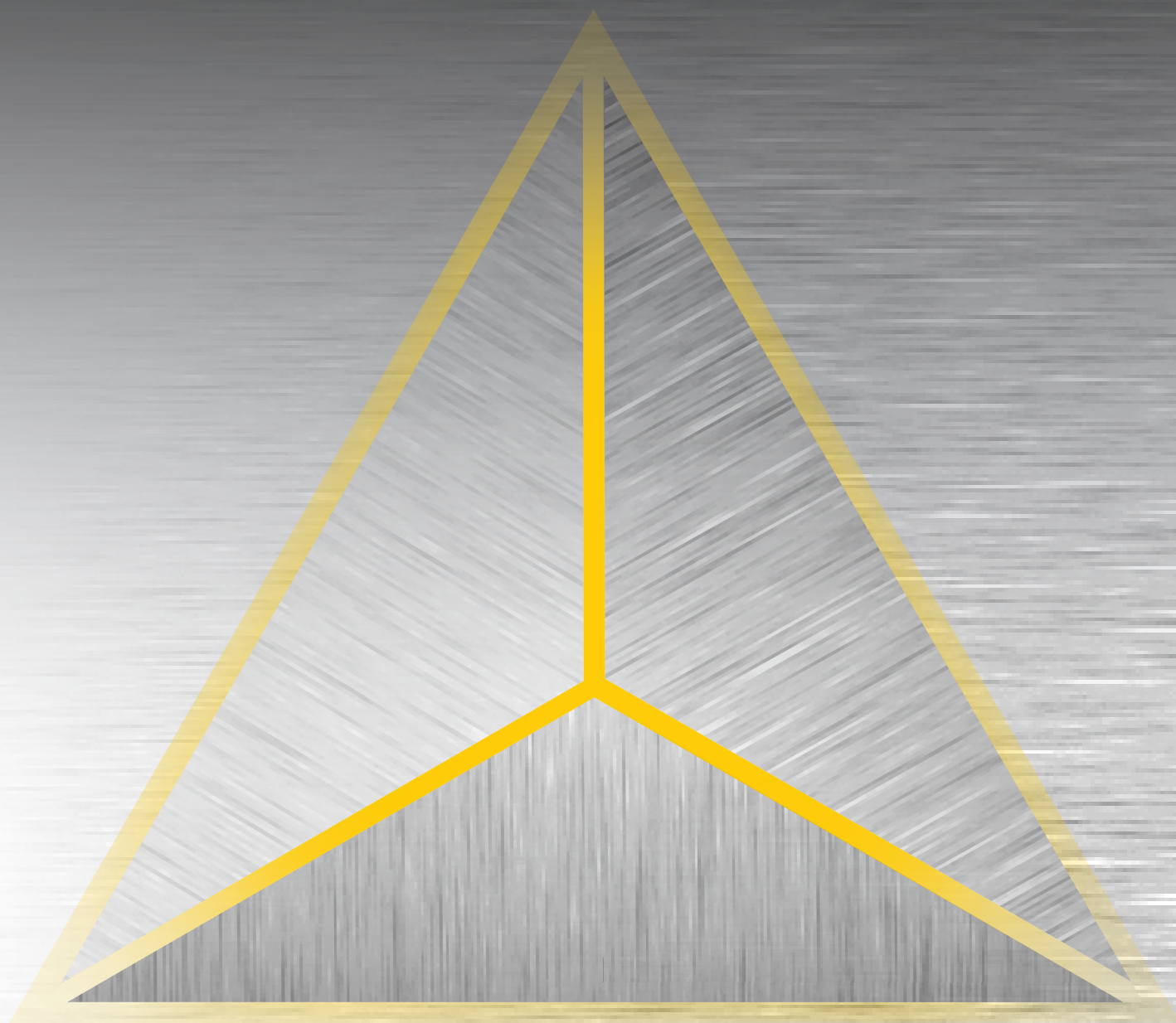

VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.



Made in Germany

INTRODUZIONE

L'approccio innovativo di SAM® all'odontoiatria si rifà ai concetti di Heinz Mack, un dentista di Monaco di Baviera.

Al momento della fondazione della società l'interesse degli addetti ai lavori era rivolto a corsi sul tema dell'occlusione. Per il corretto montaggio anatomico dei modelli si rendeva perciò necessario l'uso di un articolatore che offrisse stabili guide laterali e una protrusione di centrica regolabile. Nacque così uno strumento che prese il nome del progetto SAM® (= Schul Artikulator München cioè Articolatori Scolastici Monaco) e che pochi anni dopo si trasformò in un vero e proprio sistema di articolatori completamente regolabili. Ben noti sono oggi l'AXIOGRAPH® con il suo supplemento elettronico AXIOTRON® e la versione completamente elettronica AXIOQUICK®, oltre a tanti altri prodotti dentali nati dallo sviluppo del sistema SAM®. La continuità dell'azienda è assicurata dalla seconda generazione della famiglia.

Nel 2012 Florian Mack ha assunto non solo la completa gestione della SAM®, ma ha ereditato anche dal padre il ruolo di principale esperto, per scrivere un nuovo capitolo della sua storia.



SAM® PRÄZISIONSTECHNIK GMBH

SAM® • AXIOGRAPH® • AXIOTRON® • AXIOQUICK®
AXIOMATIC® RECORDER • AXIOSAW® • AXIOPIN® • AXIODRILL®
AXIOSIM® • AXIOCOMP® • AXIOWAX® • AXIOSPLIT®
AXIOSNAPMOUNT® • AXIOPRISA®
sam-dental

sind eingetragene Warenzeichen der SAM® Präzisionstechnik GmbH
are registered trademarks of SAM® Präzisionstechnik GmbH



INDICE

Novità	Axiocomp Software	4
	Axiosim Software	6
	Axioprisa	7
	Axiosnapmount	9
Il sistema SAM	Lo standard SAM	16
	Il piano asse-orbitale	16
	Identica geometria	17
	Disassamento della basetta di montaggio	17
	Piatto incisale e posizione dell'asta incisale	18
	L'estensione modulare degli articolatori completamente regolabili	20
	Il principio Arcon	21
	I sistemi di montaggio dei modelli	21
Articolatori	Articolatore SAM SE	22
	Articolatore SAM NEO	24
	Articolatore SAM 2P	26
	Articolatore SAM 2PX	28
	Articolatore SAM 3	30
	Implantologia SAM 3 + 15	32
	Articolatori di montaggio	33
	Accessori articolatori	33
	Accessori di verifica	33
	Kit articolatori	34
	Strumenti per articolatori	42
Arco di trasferimento		44
Assiografia	Axiomquick Recorder 3D	46
	Axiomquick Recorder II	47
	SAM Axiograph III	48
Sincronizzazione - Axiosplit		51
Montaggio modelli	Basette di montaggio avvitabili	52
	Sistema di basette di montaggio Axiosplit	53
	Sistema di basette di montaggio MPS	54
	Basette di montaggio MPS - grigie	55
	Accessori basette di montaggio	56
	Supporti di trasferimento	57
Preparazione modelli	Splitcast magnetico	58
	Axiodrill II & Axiopin	59
	Strumenti di misurazione dell'espansione	59
Dispositivi speciali	Indicatore della posizione mandibolare	60
	Condymeter III	60
	Variatore della posizione mandibolare III	60
	Ortodonzia & Chirurgia	61
	CEPH Template	63
	Strumento 3D di misurazione punti di repere	64
	Kit articolatore MRI II H	64

Indice

AXIOCOMP®



L'esclusivo software per articolatore digitale

Questo software unico nel suo genere offre l'opportunità di comprendere meglio le relazioni tra l'articolatore come simulatore del paziente e i movimenti dinamici e le posizioni dell'articolazione temporo-mandibolare. Questo software per articolatore digitale è stato creato principalmente per l'inseg-


namento, la ricerca e la scienza. Diversi scenari possono essere simulati con file di esempio e modificando i parametri di impostazione dell'articolatore o la posizione del modello. Gli effetti sui denti possono essere visualizzati in modo rapido e logico.



www.axiocomp.de

Viene fornita una versione base per il download gratuito. Tutti i requisiti importanti sono inclusi. È possibile imparare facilmente come usare l'articolatore e l'Axiocomp.

Esempi di utilizzo

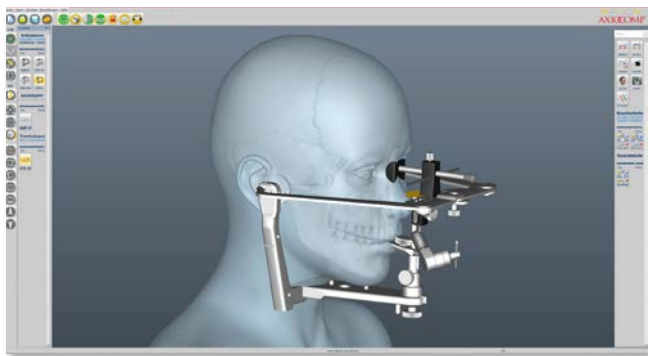


Sovrapposizione di set di dati digitali: per una migliore visualizzazione, il cranio e il viso possono essere sovrapposti utilizzando un articolatore e un arco di trasferimento. La regolazione della trasparenza aiuta a comprendere le connessioni e gli orientamenti.




Possono essere selezionati e animati vari modelli di articolatore SAM e modelli. Può essere visualizzato un movimento dinamico nell'articolatore e ingrandito da ogni angolazione fino al più piccolo dettaglio. È possibile visualizzare, anche, gli inserti di Bennett e del percorso condilare, il piatto incisale e altri accessori per modificarne le impostazioni.

Analisi delle distanze

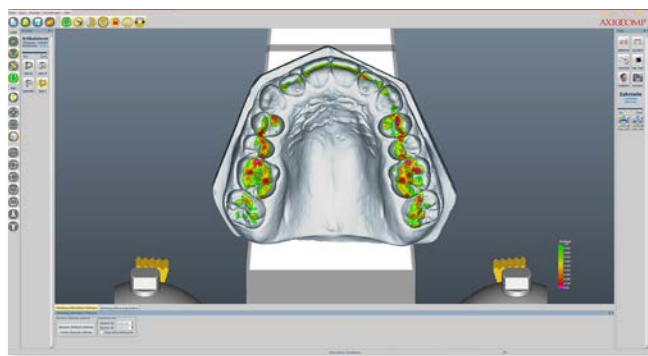


La penetrazione è rappresentata dall'ombreggiatura colorata.

Misurazione delle coordinate

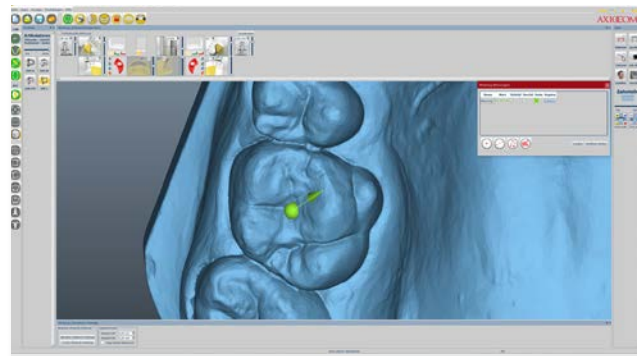


Punti e tragitti possono essere contrassegnati sui denti liberamente. Il sistema fornisce informazioni sulle coordinate spaziali 3D, nonché su tutte le lunghezze dei bordi e i loro angoli reciproci durante una misurazione della distanza. Ulteriori applicazioni consentono di utilizzare questo programma come piattaforma per l'integrazione di set di dati esterni, per la scansione del modello e la registrazione del movimento.

Compasso occlusale

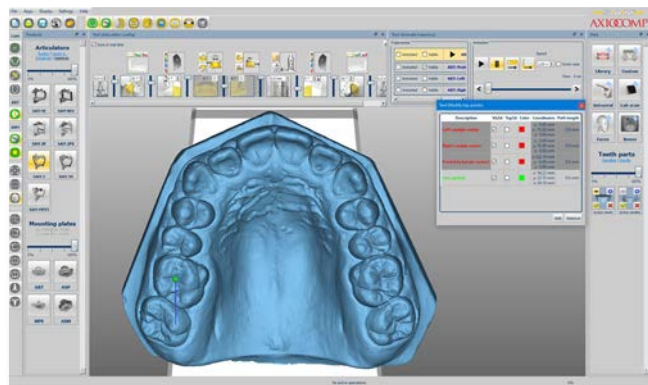

Inserto di Bennett diritto 0°

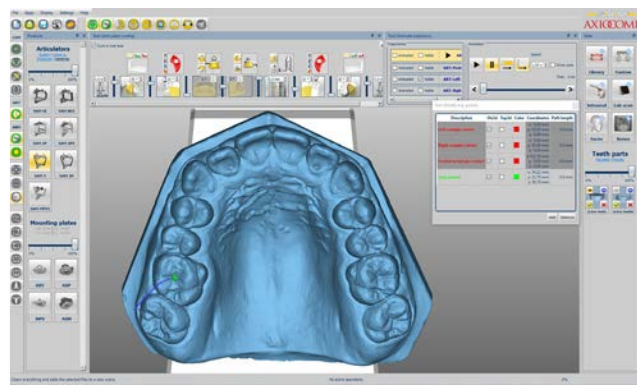

Inserto di Bennett rosso 10°

Contrassegnando diversi punti di contatto sull'occlusione, le cuspidi vengono mostrate in movimento di escursione. Nell'esempio: i diversi percorsi, con diversa programmazione dell'articolatore del Bennett.


Importante: questo software non è un dispositivo medico ai sensi del §3 MPG. Non ha scopi diagnostici, terapeutici o di monitoraggio di malattie o lesioni.



Software di simulazione per uso odontoiatrico

Questo software didattico simula l'articolazione temporo-mandibolare, riproducendo errori di montaggio, problemi dell'ATM ed errori del morso.

AxioSim® non è un software in cui i dati del paziente possono essere documentati per identificare morsi e situazioni difettosi. AxioSim offre solo l'opportunità di familiarizzare con le condizioni del quadro geometrico e di cercare cause e rimedi.

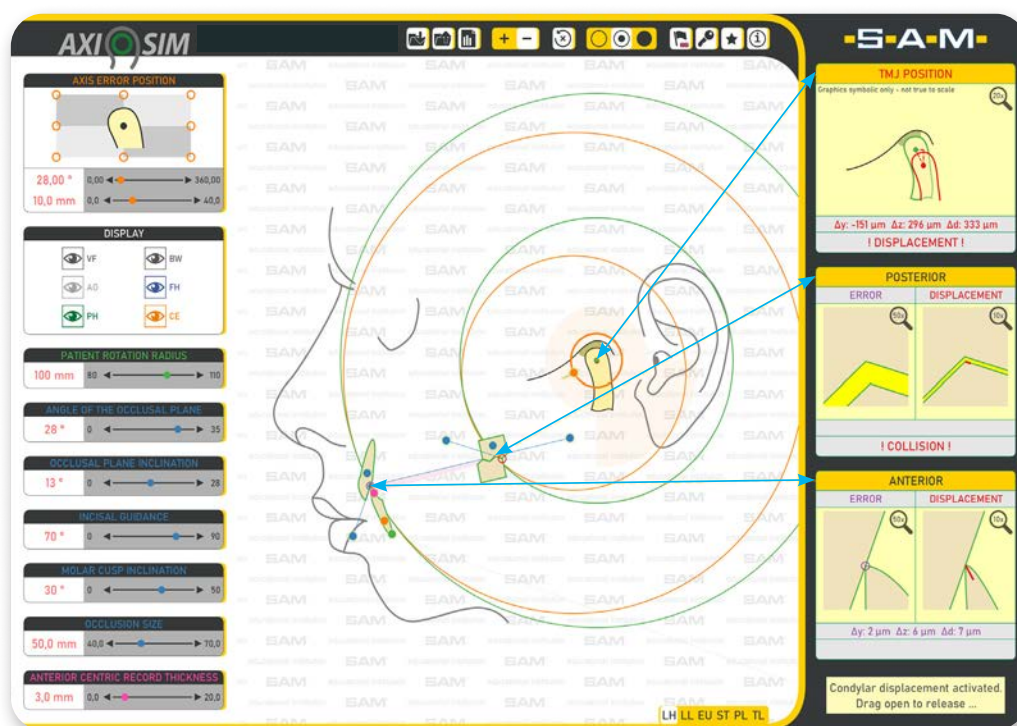

All'utente viene mostrato graficamente e numericamente quale cambiamento provoca un effetto. È possibile modificare i seguenti parametri: posizione dell'offset dell'asse (distanza e direzione), asse di rotazione del paziente, angolo del piano occlusale, inclinazione del piano occlusale, angolo di guida anteriore, inclinazione della cuspidine molare, lunghezza occlusale e spessore anteriore della registrazione. La visualizzazione di diversi livelli di riferimento completa le opzioni di impostazione.

Sono disponibili diversi sistemi di licenza che consentono diverse opzioni di impostazione.






rapido



www.axioprisa.com


preciso

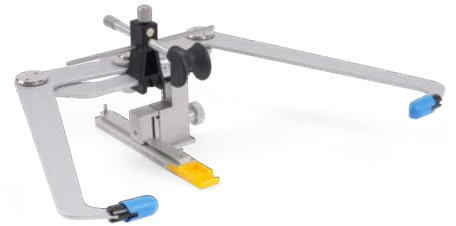

economico

Il supporto forchetta digitalizzabile

Axioprisa consente di registrare la posizione esatta dell'arcata superiore del paziente con un arco di trasferimento analogico e quindi di trasferirla digitalmente con uno scanner intraorale.

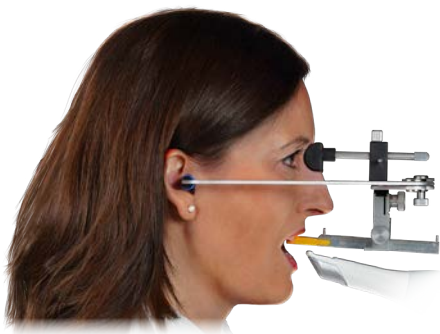

- trasferimento rapido
- software per tutti comprensibile
- posizionamento dei modelli rispetto al cranio

Prima di Axioprisa i modelli dei pazienti si trovavano in uno spazio virtuale senza un piano di riferimento esatto. Ora, con il supporto per forchetta occlusale digitale Axioprisa e una scansione orale, l'arcata superiore può essere assegnata digitalmente al paziente. I modelli vengono posizionati nell'articolatore da Axioprisa e possono essere preparati per la stampa 3D nel software AxioSnapMount e inviati a fornitori di stampa come Dentaurem Italia.

Emissione come file STL per un ulteriore utilizzo, ad esempio in Axiosnapmount o con software CAD (3Shape, Exocad,...)



**reddot award 2021
winner**



Windows




Mac




Funzioni del software



Solo quattro passaggi per avere modelli allineati con precisione in formato file STL.

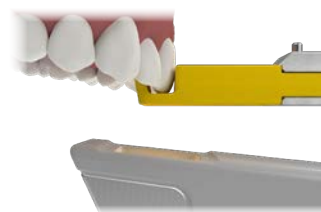


1 Importazione dei file STL / PLY

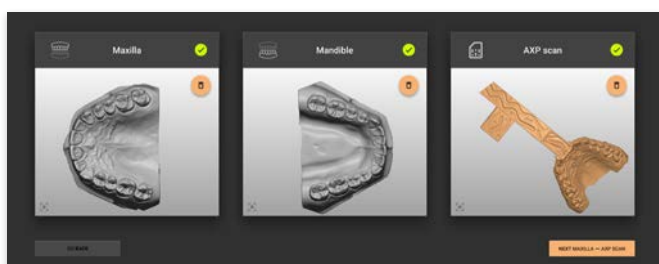


2 Allineamento scansione AXP sulla costruzione

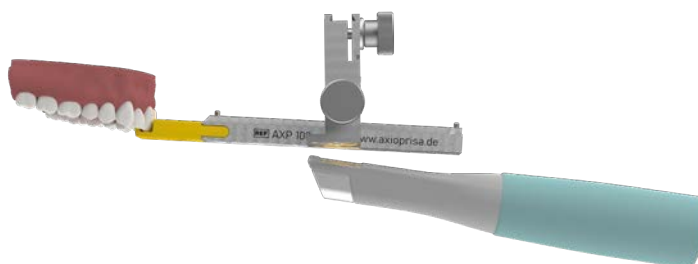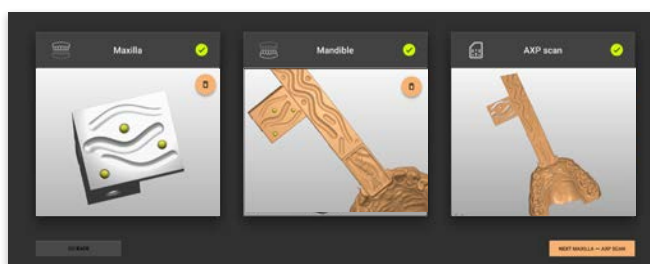


3 Allineamento scansione superiore alla scansione AXP

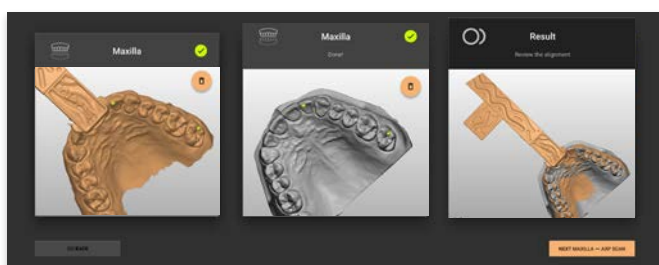

4 Esportazione modelli AXP allineati

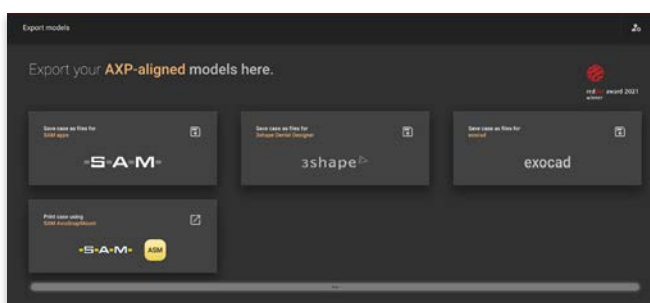

www.axioprisa.com

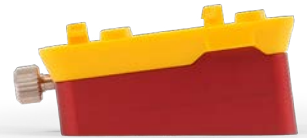

www.axiosnapmount.com

Utilizzo analogico



Utilizzo digitale

Inserimento analogico di modelli 3D con apposito blocco distanziatore e basette di montaggio o zoccolatura rapida di modelli con espansione ridotta e poco consumo di materiale.



Montaggio digitale del modello nel software. Output del file STL per ulteriori utilizzi con altri software CAD.

AxioSnapMount è nato dal fatto che i modelli precedentemente stampati dovevano essere montati con gesso o utilizzati con un morsetto di montaggio.

Ora i modelli digitali possono essere montati nell'articolatore in modo riproducibile e anatomicamente corretto.



Le distanze tra l'articolatore e il modello vengono calcolate utilizzando il software appositamente sviluppato, nonché determinati i componenti di montaggio ottimali e i modelli STL digitali vengono automaticamente "sposati" con l'attacco della basetta di montaggio del modello. Per la prima volta, i modelli digitali possono essere stampati "pronti all'uso" per l'impiego in un articolatore completamente regolabile.

Diverse dimensioni dei blocchi distanziatori e delle basette di montaggio riducono l'altezza del modello. In questo modo è possibile risparmiare tempo e materiale di stampa, nonché tempo di lavorazione nello studio e nel laboratorio.

Blocchi distanziatori

Basette di montaggio

Per i modelli superiore e inferiore sono disponibili quattro blocchi distanziatori SAM di diversa altezza.

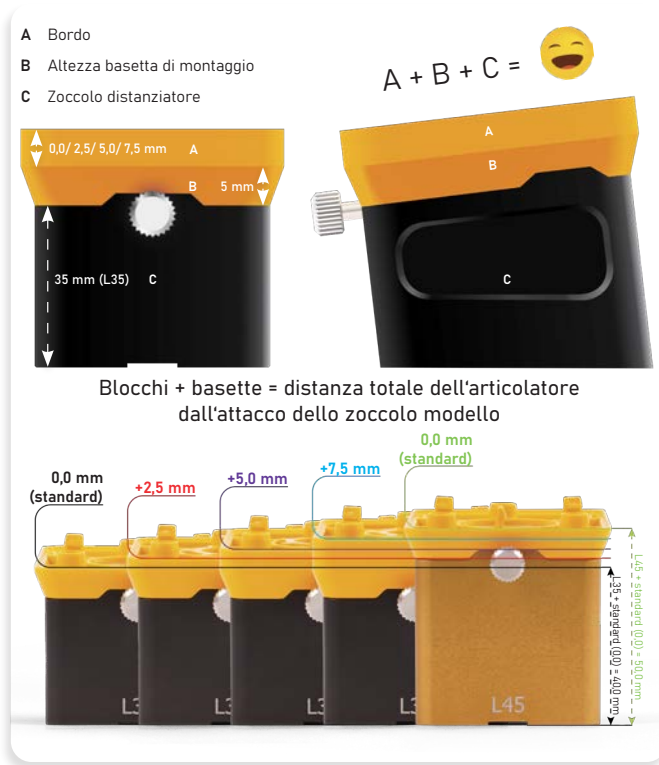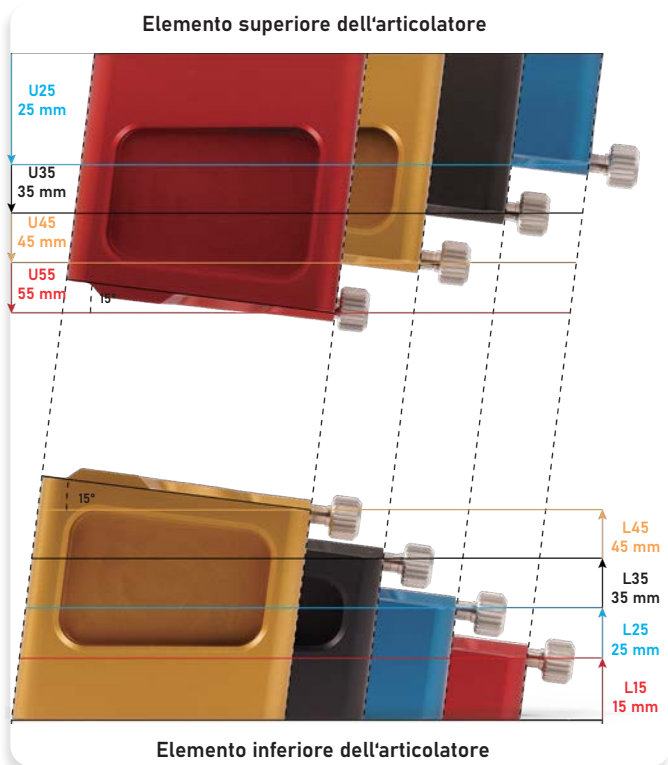

In combinazione con le basette di montaggio, l'altezza della base del modello 3D può essere regolata individualmente. Materiale, tempo e costi possono essere così risparmiati durante la stampa della base.


I blocchi distanziatori presentano ciascuno una differenza di altezza di 10 mm. Ulteriori altezze intermedie possono essere create con le quattro diverse basette di montaggio. Possono essere utilizzati con il „metodo ibrido“ così come con il „metodo di montaggio analogico“.

Funzioni del software

ASM

Solo sei passaggi per generare un modello stampato in formato STL


1 Importazione dei file STL

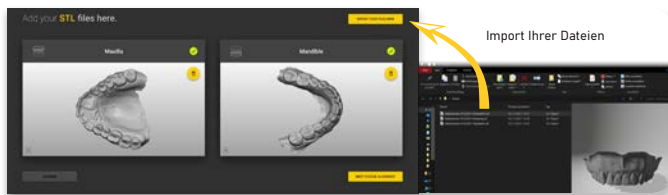

2 Taglio dell'altezza modello



3 Rifinitura fine del modello

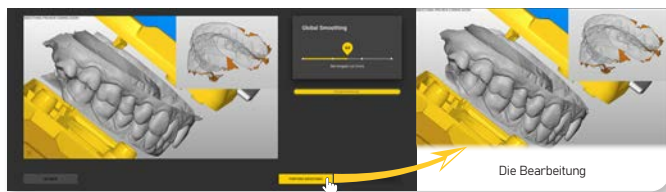


4 Determinazione del blocco distanziatore ASM



5 Verifica e generazione dei modelli finali



6 Esportazione dei modelli ASM

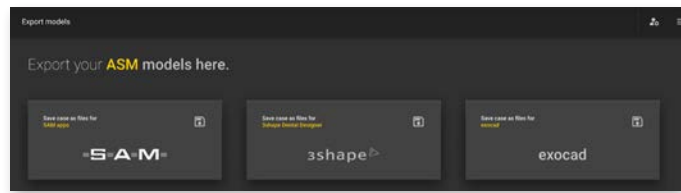

www.axiosnapmount.com

Disponibile per



Prodotti AXIOPRISA



AXIOPRISA Starter set

REF AXP 100S

1 x gruppo forchetta Axioprisa
20 x Axiojig per forchetta



Kit arco di trasferimento AXIOPRISA

REF AXP 100K

senza software

Contenuto:

1 x arco di trasferimento AxioQuick (ATB 303)
1 x supporto nasale AX (ATB 394)
1 x gruppo forchetta Axioprisa (AXP 100)
20 x AxioJig per forchetta (AXP 101)
40 x copri-olive auricolari

REF AXP 100WK

Kit Windows con licenza software
AXP per 24 mesi

REF AXP 100AK

Kit Apple con licenza software
AXP per 24 mesi



Rifornimento AXIOJIG - XS

REF AXP 101XS

Sacchetto con 10 Axiojig monouso



Rifornimento AXIOJIG - S

REF AXP 101S

Scatola con 20 Axiojig monouso



Rifornimento AXIOJIG - M

REF AXP 101M

100 Axiojig

Confezione conveniente da 5 x 20 Axiojig monouso (5 x AXP 101S)



Rifornimento AXIOJIG - L

REF AXP 101L

500 Axiojig

Confezione con 25 x 20 Axiojig monouso (25 x AXP 101S)

Software AXIOPRISA

LICENZA AXIOPRISA W24

REF AXP 821.124

AXP

24 mesi per Windows



LICENZA AXIOPRISA A24

REF AXP 921.124

AXP

24 mesi per Apple



LICENZA AXIOPRISA W12

REF AXP 821.112

AXP

12 mesi per Windows




LICENZA AXIOPRISA A12

REF AXP 921.112

AXP

12 mesi per Apple



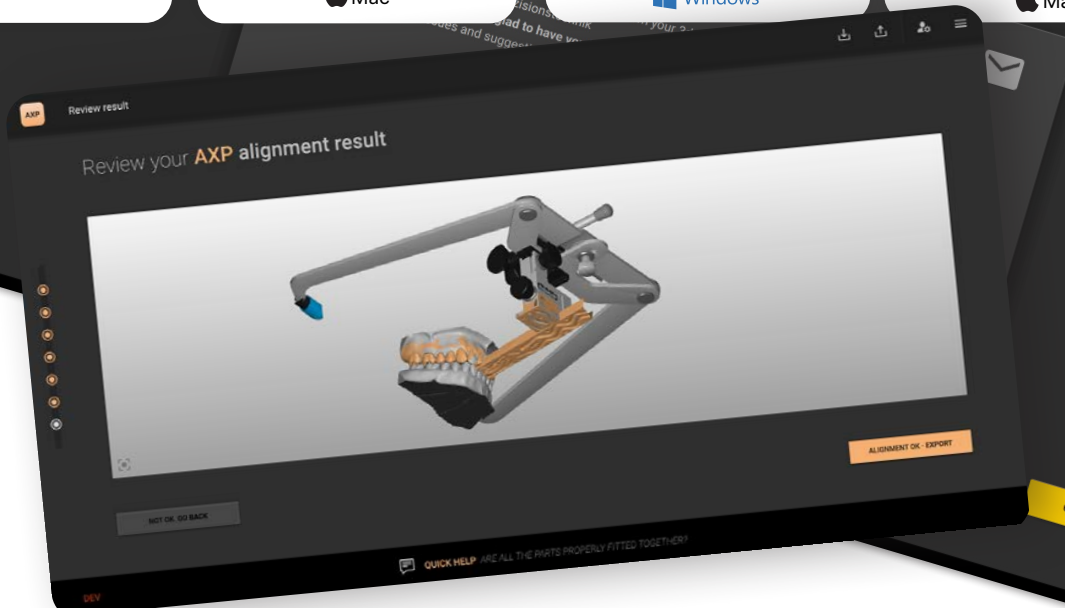

Software AXIOSNAPMOUNT

Licenza AXIOSNAPMOUNT W24

REF ASM 821.124

ASM

24 mesi per Windows



Licenza AXIOSNAPMOUNT A24

REF ASM 921.124

ASM

24 mesi per Apple



Licenza AXIOSNAPMOUNT W12

REF ASM 821.112

ASM

12 mesi per Windows




Licenza AXIOSNAPMOUNT A12

REF ASM 921.112

ASM

12 mesi per Apple



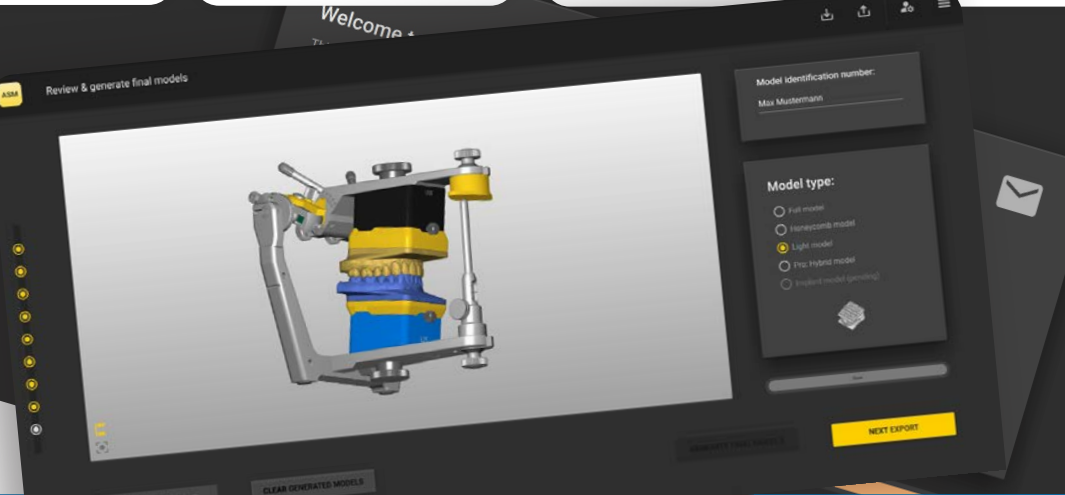

Prodotti AXIOSNAPMOUNT



SAM AXIOSNAPMOUNT KIT

REF ASM 100

Contenuto:

- 4 x blocchi distanziatori superiori
- 1 x ASM 225 / ASM 235 / ASM 245 / ASM 255 cad.
- 4 x blocchi distanziatori inferiori
- 1 x ASM 315 / ASM 325 / ASM 335 / ASM 345 cad.



SAM AXIOSNAPMOUNT STARTER KIT

Contenuto:

- 4 x blocchi distanziatori superiori
- 1 x ASM 225 / ASM 235 / ASM 245 / ASM 255 cad.
- 4 x blocchi distanziatori inferiori
- 1 x ASM 315 / ASM 325 / ASM 335 / ASM 345 cad.
- 1 x supporto ASM (ASM 103)
- 2 x magneti N (ASP 580)
- 80 x basette di montaggio (ASM 125)

REF ASM 100SK
senza software

2X



Magnete N

REF ASP 580

REF ASM 120 20x REF ASM 121 20x REF ASM 122 20x REF ASM 123 20x



SAM AXIOSNAPMOUNT Professional Kit



8X



Magnete N

REF ASP 580

REF ASM 120 20x REF ASM 121 20x REF ASM 123 20x



Contenuto:

- 4 x blocchi distanziatori superiori
- 1 x ASM 225 / ASM 235 / ASM 245 / ASM 255 cad.
- 4 x blocchi distanziatori inferiori
- 1 x ASM 315 / ASM 325 / ASM 335 / ASM 345 cad.
- 1 x supporto ASM (ASM 103)
- 8 x magneti N (ASP 580) -(blocco con magnete cad.)
- 400 x basette di montaggio (100x cad.)

REF ASM 100WK

Kit Windows con licenza software ASM per 24 mesi

REF ASM 100AK

Kit Apple con licenza software ASM per 24 mesi


Blocchi distanziatori AXIOSNAPMOUNT

Superiori

REF ASM 225

AXIOSNAPMOUNT U25

Blocco distanziatore S - blu
Altezza: 25 mm

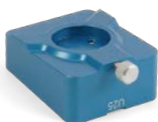

REF ASM 235

AXIOSNAPMOUNT U35

Blocco distanziatore M - nero
Altezza: 35 mm



REF ASM 245

AXIOSNAPMOUNT U45

Blocco distanziatore L - oro
Altezza: 45 mm



REF ASM 255

AXIOSNAPMOUNT U55

Blocco distanziatore XL - rosso
Altezza: 55 mm




Inferiori

REF ASM 315

AXIOSNAPMOUNT L15


Blocco distanziatore XS - rosso
Altezza: 15 mm

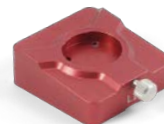

REF ASM 325

AXIOSNAPMOUNT L25


Blocco distanziatore S - blu
Altezza: 25 mm

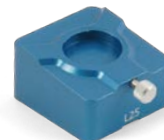

REF ASM 335

AXIOSNAPMOUNT L35


Blocco distanziatore M - nero
Altezza: 35 mm

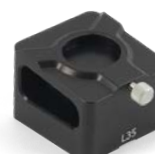

REF ASM 345

AXIOSNAPMOUNT L45

Blocco distanziatore L - oro
Altezza: 45 mm

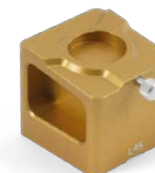


Basette di montaggio AXIOSNAPMOUNT

REF ASM 120

Basette di montaggio ASM - STANDARD


20 basette di montaggio gialle,
monouso. Altezza: standard

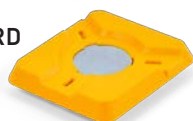

REF ASM 121

Basette di montaggio ASM - PLUS 2,5

20 basette di montaggio gialle,
monouso. Altezza: 2,5 mm

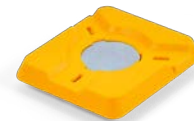

REF ASM 122

Basette di montaggio ASM - PLUS 5,0

20 basette di montaggio gialle,
monouso. Altezza: 5,0 mm



REF ASM 123

Basette di montaggio ASM - PLUS 7,5

20 basette di montaggio gialle,
monouso. Altezza: 7,5 mm



Estensioni e modifiche AXIOSNAPMOUNT

REF ASM 125

Basette di montaggio ASM - Confezione combinata

20 basette di montaggio,
gialle, monouso
standard / 2,5 / 5,0 / 7,5



REF ASM 101

Kit di conversione, anello adesivo

1 x anello adesivo,
2 x viti di fissaggio
1 x chiave a brugola



REF ASM 102

Set di conversione, anello filettato

1 x anello filettato,
2 x viti di fissaggio
1 x chiave a brugola



REF ASM 103


Supporto AXIOSNAPMOUNT

In alluminio, 310 x 240 mm
5 Kg



LO STANDARD SAM


Il sistema di articolatori SAM differisce per molti aspetti dai comuni e più diffusi articolatori. Ecco alcuni dei punti di forza unici.

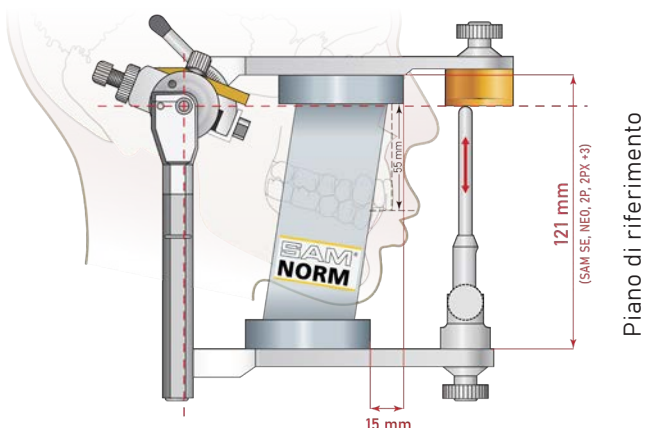

Disassamento basette di montaggio


PIANO DI RIFERIMENTO ANATOMICO

Il trasferimento anatomico in articolatore della situazione del paziente, è uno dei punti chiave del sistema SAM. I perni di supporto dell'arco di trasferimento anatomico, l'asse cerniera, il punto orbitale e il punto di contatto dell'asta incisale sul piatto incisale, sono in linea e paralleli all'elemento superiore e inferiore dell'articolatore. La variazione dell'altezza verticale non provoca quindi alcuna deviazione dell'asta incisale. Di conseguenza, questo errore non deve essere compensato da un'asta incisale curva o dal riposizionamento del piatto di guida anteriore.

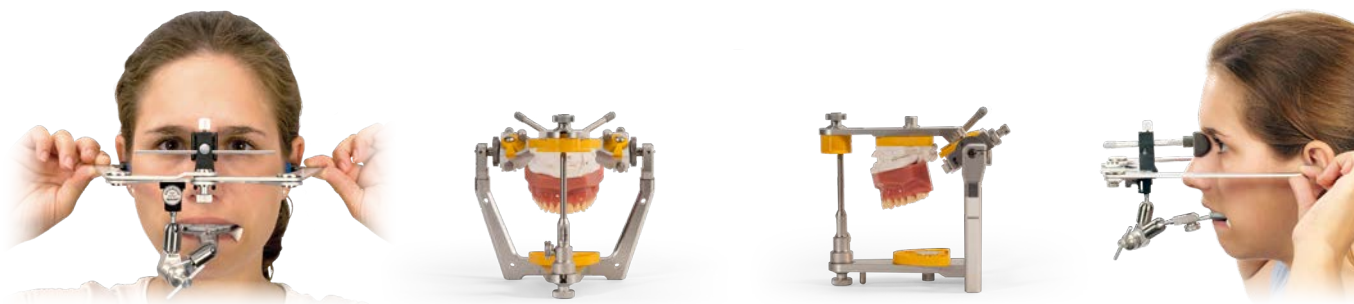

PIANO ASSE-ORBITALE

L'utilizzato piano di riferimento porion-orbitale corrisponde al piano orizzontale di Francoforte ed è correttamente indicato nel sistema SAM come piano asse-orbitale. Con l'ausilio dell'arco di trasferimento SAM, la posizione del modello del paziente può essere trasferita sull'articolatore in modo anatomicamente corretto.

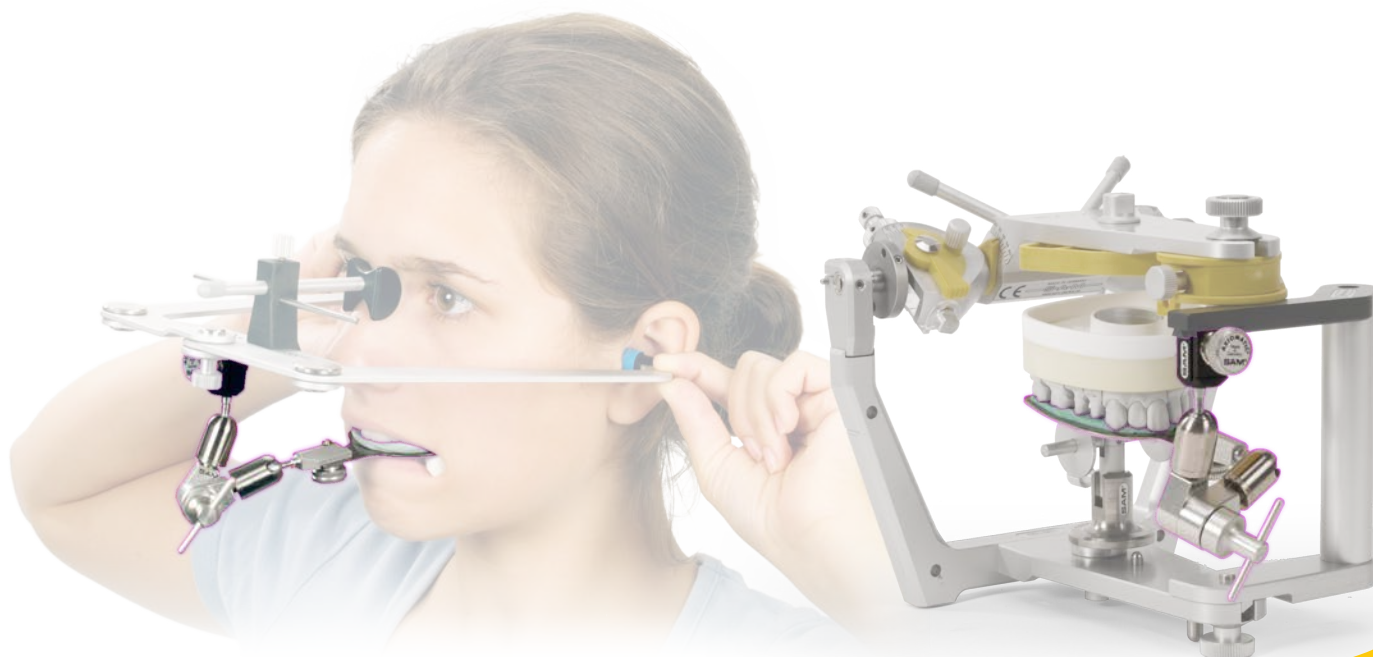

IDENTICA GEOMETRIA

Tutti gli articolatori SAM possiedono la stessa altezza e si basano sullo stesso principio costruttivo.



Tutti gli attuali articolatori e strumenti SAM si basano sull'altezza „P”
(P sta per altezza protesica = 121 mm tra elemento superiore e inferiore dell'articolatore).




Gli articolatori SAM sono articolatori Arcon, le sfere condilari si trovano, in modo autentico per l'articolazione temporo-mandibolare, nell'elemento inferiore dell'articolatore, e hanno un diametro di 10 mm.



La distanza tra il centro della sfera condilare e il perno di supporto dell'arco di trasferimento è standardizzata e misura 10 mm.

DISASSAMENTO BASETTE DI MONTAGGIO

Un'altra particolarità del sistema SAM è la disposizione sfalsata di 15 mm delle basette di montaggio, che tiene conto della normale relazione dei mascellari. Questa posizione della basetta di montaggio sfalsata distalmente, facilita il montaggio del modello del mascellare inferiore e richiede meno gesso. La posizione del modello sembra più armoniosa.

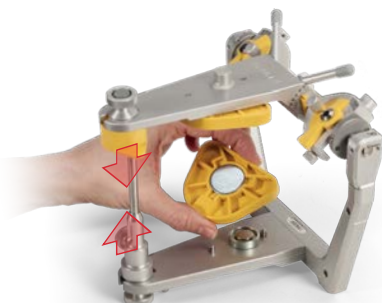

L'identica posizione dei perni di supporto consente il posizionamento esatto della basetta di montaggio.




SAM Neo con disassamento della basetta.

PIATTO INCISALE E POSIZIONE ASTA INCISALE


Il punto rosso al centro della sfera condilare corrisponde a un asse di rotazione del condilo mandibolare. È conosciuto anche come "asse cerniera".

La linea rossa tratteggiata rappresenta il piano asse-orbitale (AOE). La superficie antero-superiore del piatto incisale e i centri delle sfere condilari posteriori giacciono sullo stesso piano orizzontale.


L'asta incisale sottostante, a contatto con il piano guida incisale superiore, simula la relazione tra i bordi incisali superiore e inferiore dei denti del paziente. Questo promuove il normale schema funzionale.

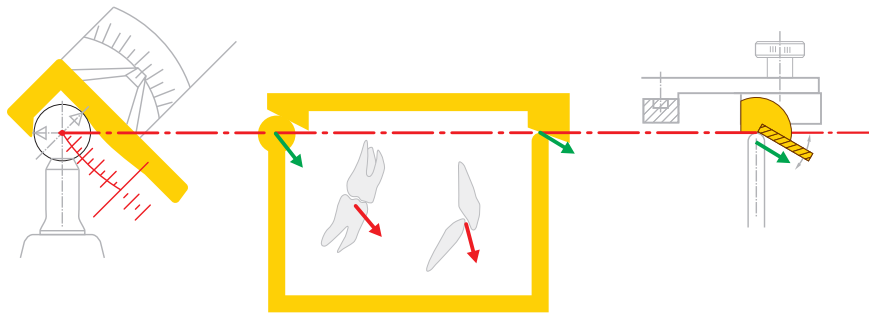

Il piatto incisale serve a sostenere l'asta incisale e quindi a garantire la dimensione verticale.

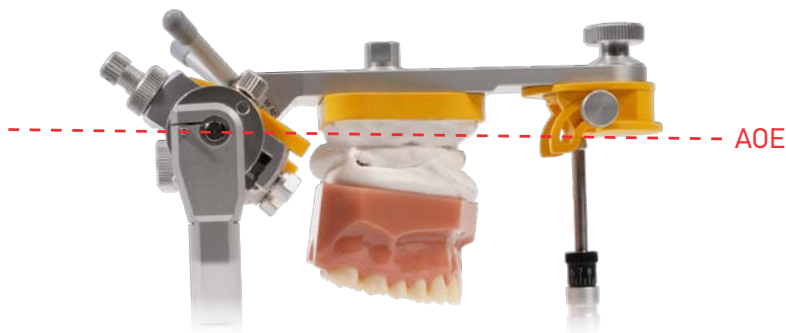


Il piano asse-orbitale viene stabilito come piano di riferimento dalla superficie di appoggio del piatto incisale e dal perno di supporto. La superficie di guida condilare si trova nell'elemento superiore dell'articolatore grazie al piatto incisale.

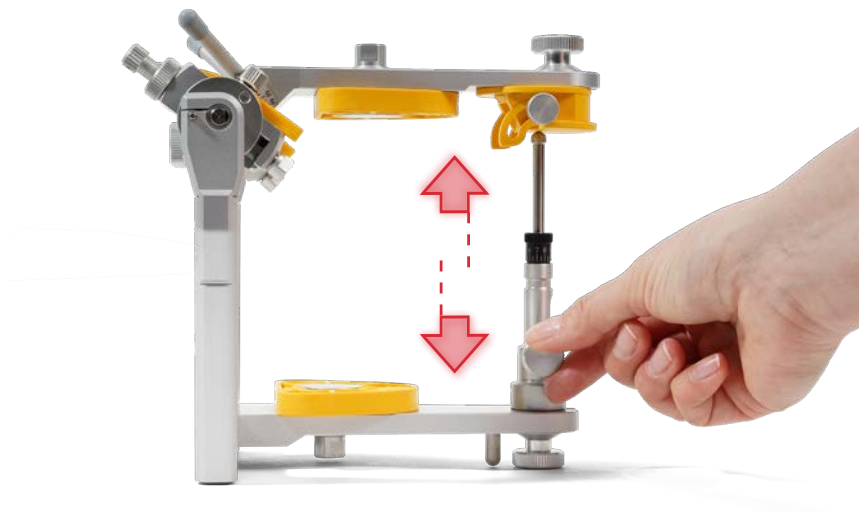

Movimento verticale dell'asta incisale.


Corretto

Se l'asta incisale si trova nell'elemento inferiore dell'articolatore, come raccomandato, la sua posizione e il suo punto di contatto sul piatto incisale rimangono gli stessi durante il sollevamento e l'abbassamento dell'asta.

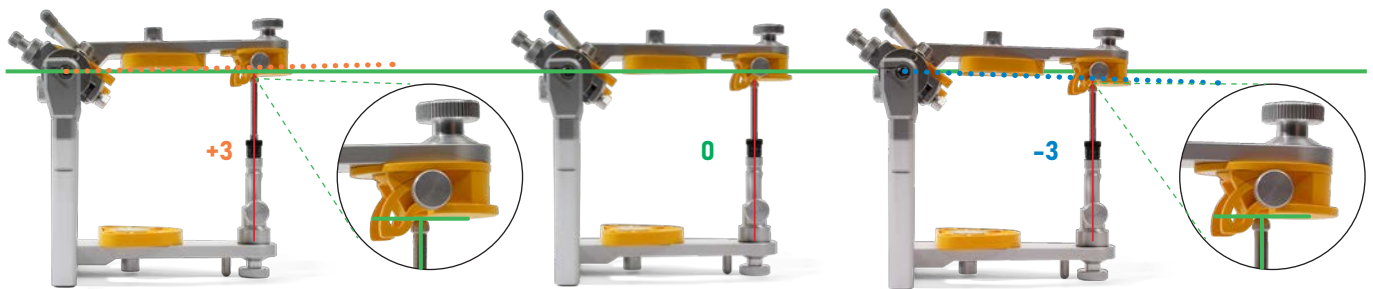

Scorretto

Se l'asta incisale si trovasse nell'elemento superiore dell'articolatore, la dimensione verticale cambierebbe quando l'asta incisale viene sollevata o abbassata. Con un movimento dinamico, la posizione dell'asta e il suo punto di contatto si sposterebbero.

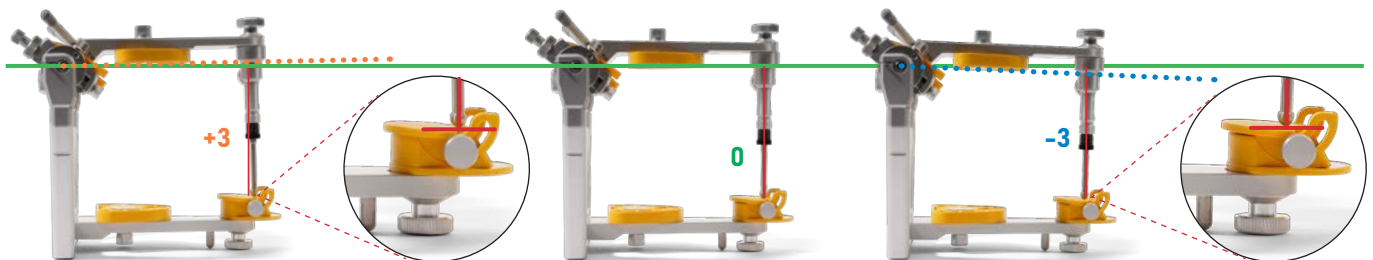

L'ESTENSIONE MODULARE DEGLI ARTICOLATORI COMPLETAMENTE REGOLABILI



SAM 2P



SAM 2PX



SAM 3

Molti altri strumenti e accessori completano il sistema SAM in modo unico in tutte le direzioni. Nessun altro fabbricante rende il lavoro quotidiano con l'articolatore più facile per l'utente, con una selezione così ampia di utili prodotti. Esistono validi accessori piccoli o grandi, analogici o digitali per quasi

tutte le aree, sempre adattati allo standard dell'articolatore e scambiabili tra loro. Per gli utenti del nostro arco di trasferimento SAM, offriamo un'ampia selezione di supporti per il trasferimento dei modelli dei pazienti, anche in articolatori di altre marche



SAM 2P



SAM 2PX




SAM 3



Grazie alla costruzione ben congegnata e standardizzata, gli strumenti SAM sono compatibili tra loro.

IL PRINCIPIO ARCON

Tutti gli articolatori SAM sono strumenti Arcon.

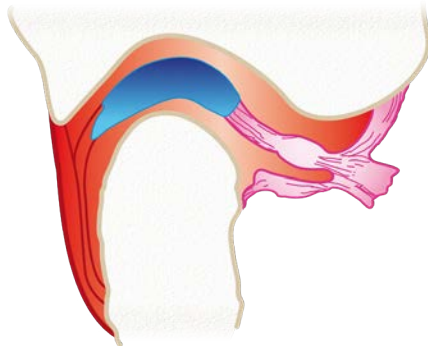

Articolazione mandibolare



Articolatore ARCON

Grazie al principio Arcon, nell'articolatore SAM i movimenti dell'articolazione mandibolare del paziente possono essere simulati in modo autentico. Le sfere condilari si trovano nell'elemento inferiore dell'articolatore e si muovono nelle ceste condilari di quello superiore.

I SISTEMI DI MONTAGGIO DEI MODELLI



A seconda delle esigenze, gli articolatori e gli strumenti SAM possono essere dotati del sistema di sincronizzazione Axiosplit per una massima precisione, del robusto sistema magnetico MPS o della classica basetta di montaggio avvitabile.

SAM SE

„L'ARTICOLATORE A VALORE MEDIO LEGGERO“



REF ART 600



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 615M



per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM SE con curvatura 1 integrata e guide di Bennett con movimento di lateralità normale e piatto incisale piano (ART 275).

CARATTERISTICHE

Il SAM SE viene apprezzato come articolatore economico, leggero e tuttavia molto stabile.



Tutte le più importanti caratteristiche ergonomiche degli articolatori SAM sono state incorporate nel design dell'articolatore SAM SE.





Il SAM SE è adatto per l'uso quotidiano in tutte le discipline dell'odontoiatria. La nostra conoscenza dei requisiti minimi su cui si basa questo dispositivo è frutto della nostra esperienza in diagnostica e terapia: posizionamento del modello adeguato al cranio e inclinazione regolabile del percorso condilare con curvatura 1, guide di Bennett che corrispondono all'inserto SAM verde.

Il SAM SE è stato sviluppato con una plastica rinforzata in fibra di vetro utilizzata anche nell'ingegneria aeronautica. Ciò lo rende leggero e molto stabile. Lo standard SAM consente l'uso di dispositivi accessori SAM. Per l'articolatore SAM SE è disponibile un'ampia scelta di accessori.



SAM NEO

„L'ARTICOLATORE ROBUSTO ENTRY LEVEL“

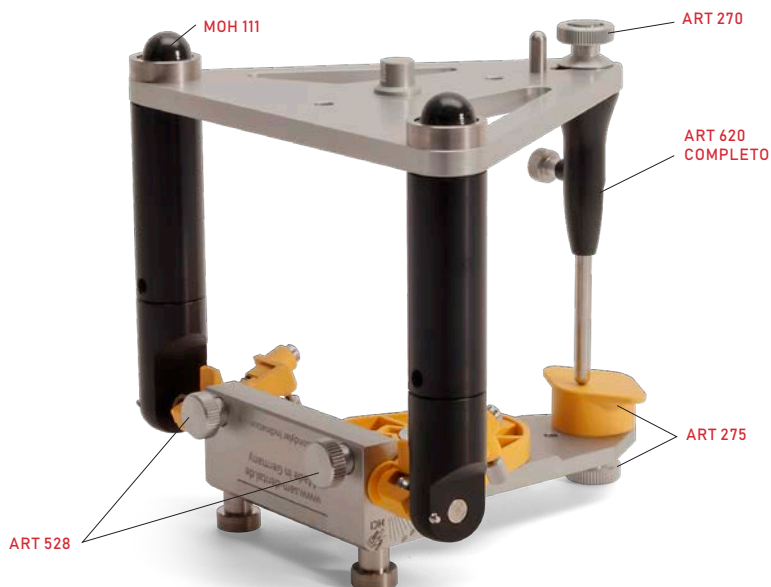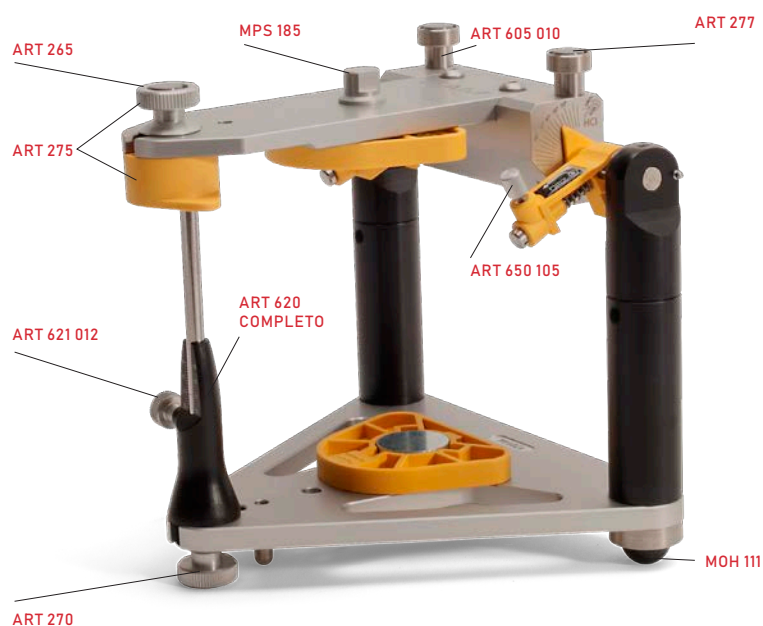

Robusto articolatore entry-level in qualità SAM. Solido strumento quotidiano per lo studio e il laboratorio, disponibile fissaggio dei modelli magnetico o a vite e di utilizzo intuitivo. Libera visuale dei modelli da dietro, in standard SAM. Semplice manutenzione, design convincente.



REF ART 650S



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 650M



per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM NEO con curvatura 1 integrata e guide di Bennett con movimento di lateralità normale e piatto incisale piano (ART 275).

CARATTERISTICHE

Il SAM NEO è un articolatore economico e molto stabile. Tutti i requisiti minimi sono riuniti in questo articolatore.



Nell'articolatore SAM NEO può essere impostata l'inclinazione del percorso articolare (angolo), per la curvatura del percorso articolare è stato utilizzato un valore medio statistico basato su modelli anatomici. Con l'articolatore SAM questo corrisponde all'inserto condilare 1 (bianco, con una leggera curvatura).





Quando l'articolatore è aperto, risultano molto pratici i supporti posteriori. Tali supporti garantiscono una migliore visuale del lavoro. Tutti i supporti possono essere ordinati a parte essendo accessori opzionali.

Lo standard SAM consente l'uso di dispositivi accessori SAM. Per l'articolatore SAM NEO è disponibile un'ampia scelta di accessori.



SAM 2P

„L'ORIGINALE FAMOSO“

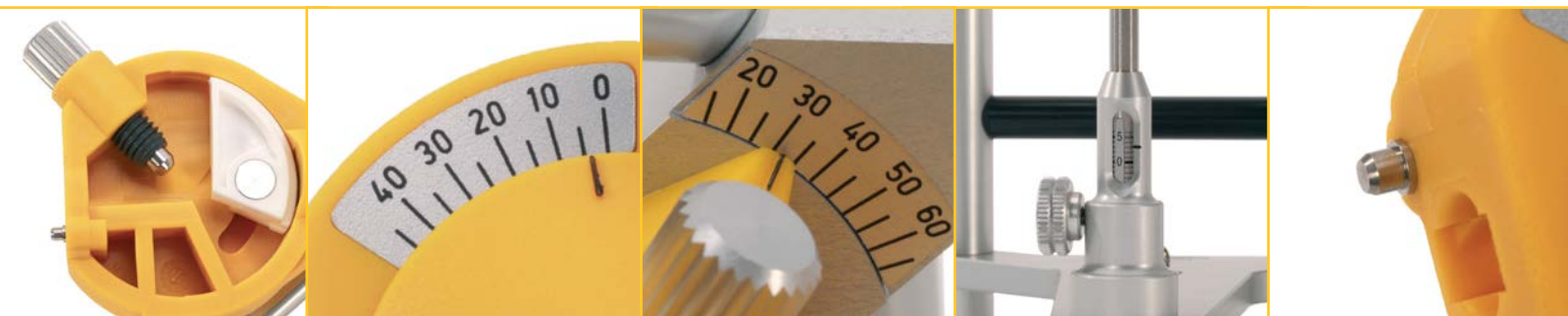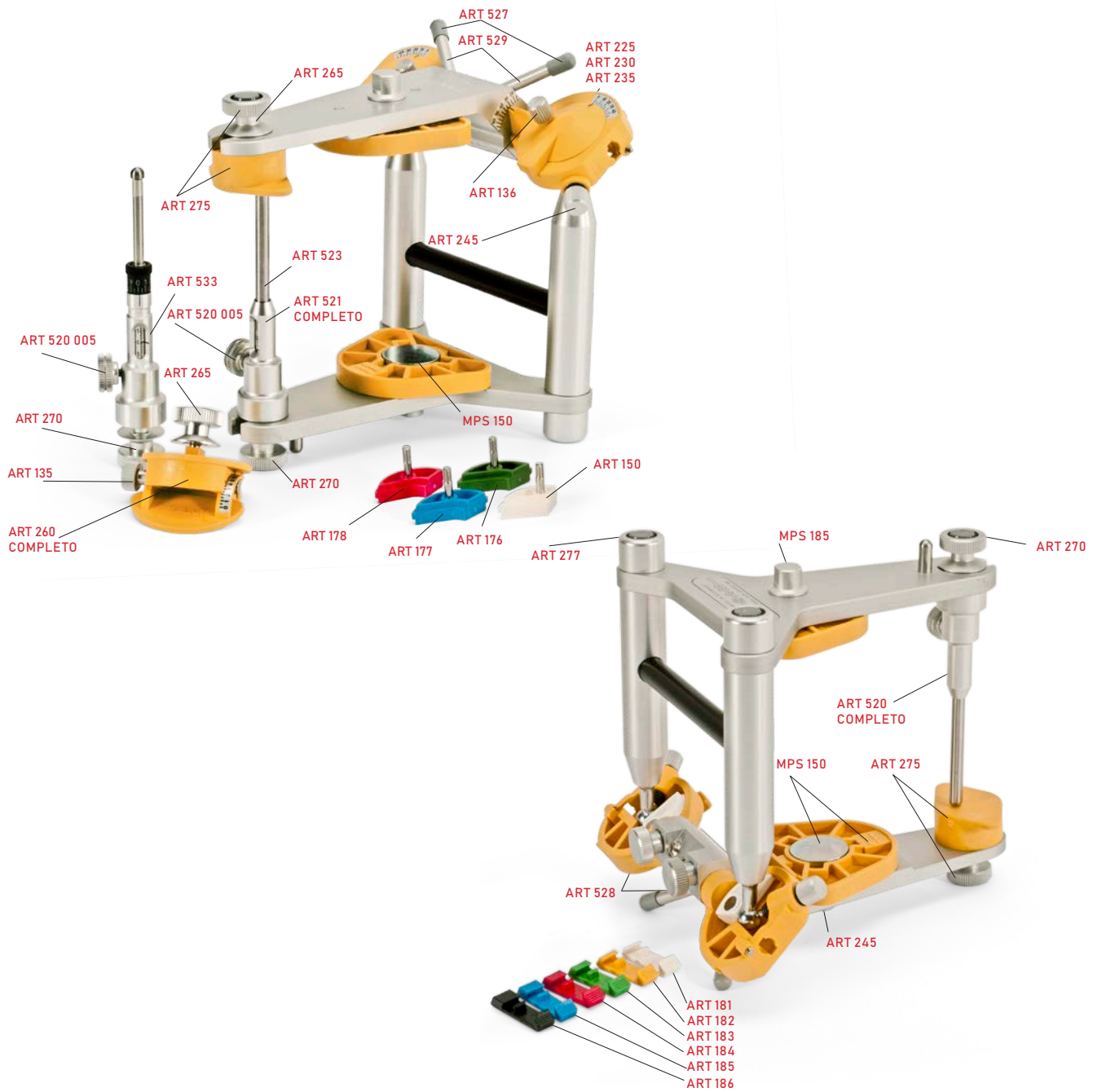

REF ART 300



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 315M



per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM 2P con ceste condilari a curvatura 1 (ART 225), guide di Bennett bianche (ART 150) e verdi (ART 176), piatto incisale piano (ART 275).

CARATTERISTICHE

L'articolatore sviluppato per la formazione e la ceratura, ha accompagnato quotidianamente per decenni dentisti e odontotecnici.



Caratteristica del SAM 2P è il semplice bloccaggio centrico mediante una vite a molla.



Protrusione di 5 mm

L'angolo di Bennett e l'inclinazione del percorso condilare sono regolabili individualmente, l'alloggiamento del condilo e gli inserti guida di Bennett sono facilmente intercambiabili.



REF ART 225

Ceste condilari a curvatura 1 (bombatura leggera) +Bennett bianco



REF ART 230

Ceste condilari a curvatura 2 (bombatura media) +Bennett bianco



REF ART 235

Ceste condilari a curvature 3 (bombatura accentuata) +Bennett bianco

REF ART 245

Vite bloccaggio centrica
Vite zigrinata filettata per ceste condilari SAM 2C e SAM 2P



REF ART 150

Guide di Bennett bianche
Diritte, un paio per SAM 1, SAM 2C e SAM 2P



REF ART 170

Ass.guide di Bennett 2x
- verdi (ART 176)
- blu (ART 177)
- rosse (ART 178)
per SAM 2C e SAM 2P



REF ART 180

Ass. inserti protrusiva 2x
- bianchi (ART 181) 1 mm
- gialli (ART 182) 2 mm
- verdi (ART 183) 3 mm
- rossi (ART 184) 4 mm
- blu (ART 185) 5 mm
- neri (ART 186) 6 mm



SAM 2PX

„L'ALTERNATIVA CONVENIENTE“



REF ART 400



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 415M



per sistema di basette magnetiche MPS


Articolatori SAM 2PX con inserti piani guida bianchi a curvatura 1 (ART 541), guide di Bennett diritte in metallo (ART 439) e verdi (ART 445), piatto incisale piano (ART 275), antenna superiore (ART 525) e supporti posteriori (ART 526).

CARATTERISTICHE

Il SAM 2PX è una variante di articolatore con molte utili proprietà. Questo articolatore Arcon è dotato di un pratico blocco della centrica (molla a balestra) e di rotazione in apertura illimitata.



La parte superiore dell'articolatore può essere sostenuta quando è aperta. I supporti antiribaltamento garantiscono una migliore visuale sul lavoro.

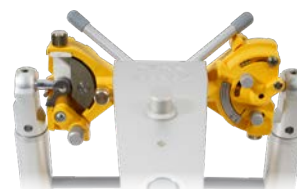

Grazie alle coperture trasparenti delle ceste condilari, gli elementi superiore e inferiore dell'articolatore rimangono collegati durante i movimenti, anche quando il blocco di centrica è aperto.

La possibilità di regolare la sporgenza fino a 5,5 mm è già integrata. L'angolo di Bennett e l'inclinazione del tragitto condilare sono regolabili individualmente, i piani-guida così come gli inserti di Bennett possono essere facilmente sostituiti.



REF ART 435

Coperture ceste condilari (1 paio) con vite zigrinata (ART 436) per unire i due elementi dell'articolatore con centrica aperta.



REF ART 439

Guide di Bennett PX (1 paio) in metallo, diritte.




REF ART 440

Set guide di Bennett e piani-guida PX

Contenuto del set:

- 2x Bennett verdi (ART 445)
- 2x Bennett rossi (ART 446)
- 2x Bennett blu (ART 447)
- 1x cacciavite
- 2x curvatura 1 bianchi (ART 541)
- 2x curvatura 2 verdi (ART 542)
- 2x curvatura 3 rossi (ART 543)
- 1x chiave a brugola

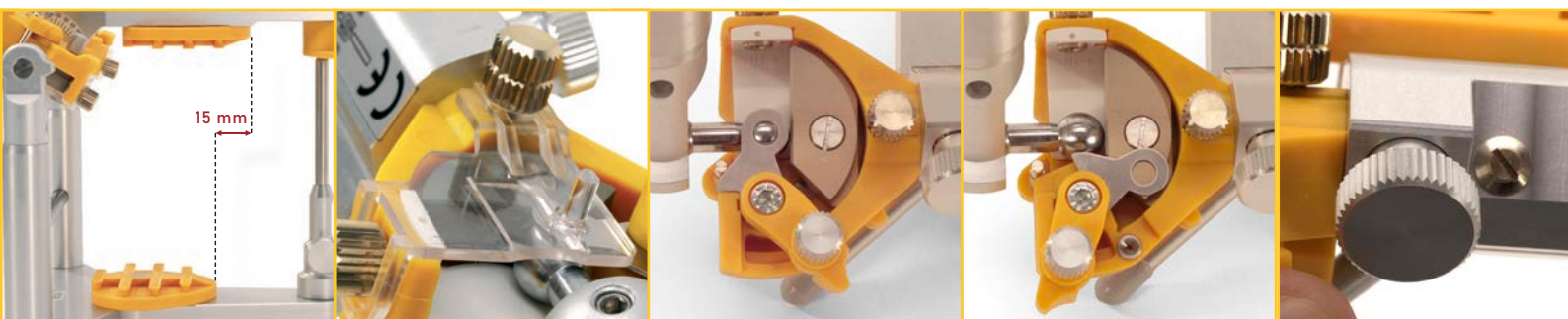

SAM 3

„LO STRUMENTO PROFESSIONALE“



SAM 3 Basic

REF ART 500



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 515M



per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM 3 Basic con antenna superiore (ART 525), supporti posteriori (ART 526), inserti piani guida a curvatura 1 bianchi (ART 541), guide di Bennett diritte in metallo (ART 539), guide di Bennett in metallo verdi (ART 545), asta incisale IIIP (ART 520), piatto incisale piano (ART 275).

CARATTERISTICHE

Il SAM 3 è considerato l'articolatore per esigenze elevate. Colpisce per la massima precisione e funzionalità.



Come tutti gli articolatori SAM, anche il SAM 3 si basa sul principio Arcon e allo standard SAM. Grazie al perfetto bloccaggio della centrica (blocco conico a triplo cuscinetto a sfera), il SAM 3 raggiunge la massima precisione con una rotazione di apertura illimitata.



Le intercambiabili guide di Bennett con diversi movimenti di lateralità possono rimanere nel dispositivo senza sacrificare la precisione centrica. Le curvature condilari sono facilmente intercambiabili.

Grazie alle coperture trasparenti delle ceste condilari, gli elementi superiore e inferiore dell'articolatore rimangono collegati durante i movimenti, anche quando il blocco di centrica è aperto. Opzionale è la regolazione in modo continuo della protrusiva e retrusiva.



REF ART 530

Vite di protrusione/retrusione (2 pezzi) con vite zigrinata consentono la protrusione da 0 a 6 mm e la retrusione da 0 a 2 mm, con chiave di fissaggio gialla (ART 510) e chiave a brugola.



REF ART 535

Coperture ceste condilari (1 paio) sinistra e destra con viti zigrinate (ART 537) per aprire l'articolatore in centrica.



REF ART 539



Guide di Bennett (1 paio) diritte, in metallo.



REF ART 548


Set guide di Bennett e piani-guida

- Ass. guide di Bennet II (ART 547) 2x cad. verdi metallo (ART 545), rossi (ART 178), blu (ART 177)
- Ass. piani-guida (ART 540) 2x cad. curv. 1 bianchi (ART 541), curv. 2 verdi (ART 155), curv. 3 rossi (ART 156)
- 1x chiave fissaggio gialla (ART 510)
- 2x anelli guida protrusiva Gutowski (ART 581)

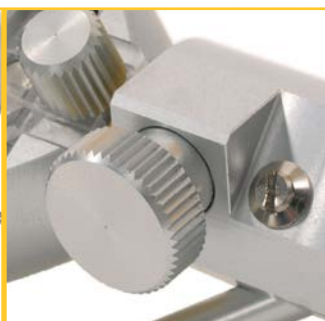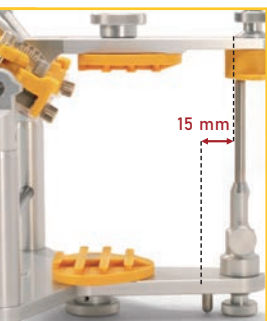

SAM 3 Standard


REF ART 531

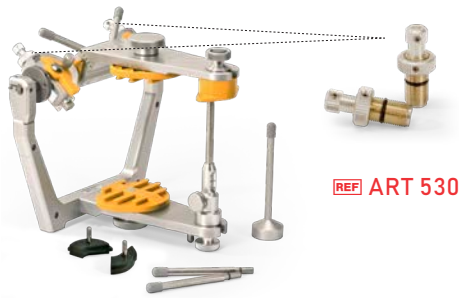

REF ART 530

per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 546M

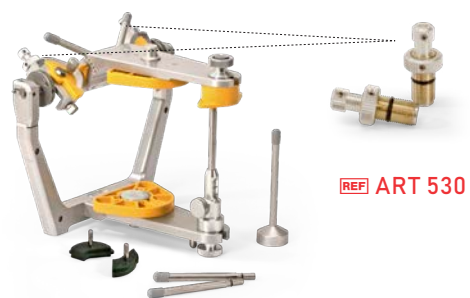


REF ART 530

per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM 3 Standard con antenna superiore (ART 525), supporti posteriori (ART 526), inserti piani-guida a curvatura 1 bianchi (ART 541), guide di Bennett diritte in metallo (ART 539), guide di Bennett in metallo verdi (ART 545), asta incisale IIIP (ART 520), piatto incisale piano (ART 275), viti di protrusione/retrusione (ART 530)

SAM 3 Professional

REF ART 550

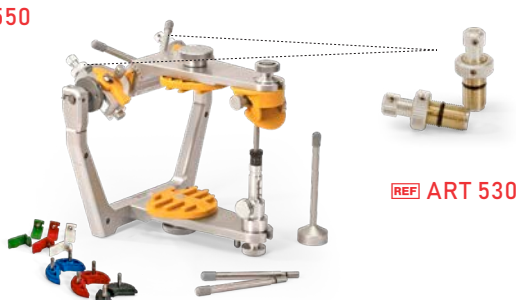

REF ART 530

per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 565M



REF ART 530

per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM 3 Professional con antenna superiore (ART 525), supporti posteriori (ART 526), assortimento inserti piani-guida (ART 540), assortimento guide di Bennett II (ART 547), asta incisale IIIPM micro regolabile (ART 533), piatto incisale regolabile (ART 260), viti di protrusione/retrusione (ART 530)

SAM 3 + 15 implantologia

REF ART 560



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF ART 575M



per sistema di basette magnetiche MPS

Articolatori SAM 3 con asta di supporto verticale (ART 525), aste di supporto posteriori (ART 526), set curvatura (ART 540), set guide Bennett II (ART 547), asta incisale IIIPM microregolabile (ART 533), piatto incisale regolabile (ART 260), viti di protrusione/retrusione (ART 530),.



REF ART 311

per sistema basette avvitabili



REF MPS 311

per sistema basette magnetiche

Adattatori avvitabili II per modelli

Per utilizzare i modelli di altezza P sui dispositivi SAM più alti di 15 mm e i modelli di altezza C sugli articolatori SAM 2P, 2PX e 3.



REF ASP 445

Adattatore AXIOSPLIT

Per utilizzare i modelli di altezza P sui dispositivi SAM più alti di 15 mm e i modelli di altezza C sugli articolatori SAM 2P, 2PX e 3.

Articolatori di montaggio



REF ASP 350

AXIOSPLIT strum. riferimento centrica II
Strumento di montaggio magnetico dei modelli (sup. + inf.), per standardizzare gli articolatori SAM 2P, SAM 2PX e SAM 3, senza l'impiego del dispositivo di normalizzazione e della relativa asta incisale di altezza C.



REF MOH 700

per sistema di basette avvitabili e AXIOSPLIT



REF MOH 715M

per sistema di basette magnetiche MPS

Strumenti per il montaggio dei modelli

Strumenti da laboratorio ideali per il montaggio del modello superiore e inferiore evitando di sporcare con gesso gli articolatori, altezza secondo lo standard SAM SE, NEO, 2P, 2PX e 3.

Accessori per articolatori



REF ART 260

Piatto incisale regolabile

Con scala graduata per rotazioni e inclinazioni, per guida dei denti frontali e posteriori. Si adatta a tutti gli articolatori SAM.



REF ART 275

Piatto incisale piano

Giallo, resistente al monomero, altezza 16 mm, con vite zigrinata. Si adatta a tutti gli articolatori SAM.



REF ART 520

Asta incisale IIIIP completa

Con scala laterale regolabile per SAM 2P, 2PX, e 3.



REF ART 520R

Asta incisale III reverse

Con scala laterale regolabile (rossa) per SAM 2P, 2PX, e 3. Per l'utilizzo sull'elemento superiore dell'articolatore.

Accessori per articolatori



REF ART 525

Antenna superiore

Prolungamento da applicare all'elemento superiore di tutti gli articolatori SAM.



REF ART 526

Supporti posteriori

(2 pezzi) permettono il ribaltamento dell'articolatore per migliorare la visuale, per SAM 2PX e 3.



REF ART 533

Asta incisale IIIIPM completa

Asta incisale di precisione micro regolabile con vite zigrinata e microscala da 0,1 mm, per SAM 2P, 2PX e 3.



REF ART 620

Asta incisale SE completa

Per articolatori SAM NEO e SE.

Accessori di verifica



REF ART 187

Kit di verifica e regolazione
Per articolatori.

Contenuto del kit:

- chiave a brugola 1,5 mm (ART 290001),
- chiave a brugola 2,0 mm (ART 511),
- chiave a brugola 2,5 mm

- (ART 290002),
- cacciavite (ART 187002),
- sonda 0,05 mm (ART 513),
- chiave gialla (ART 510),
- tubetto di lubrificante da 5 g per metallo, assi e filettature (ART 193)



REF ART 396

Zoccolo di prova splitcast

Per verificare il livellamento degli articolatori, completo di supporto in plastica con base splitcast e anello in gomma per la realizzazione di uno zoccolo di prova individuale in gesso per tutti gli articolatori e le basette di montaggio



REF ART 398

Strumento di standardizzazione

In metallo per standardizzare gli articolatori SAM allo standard P, solo per sistema di basette avvitabili.

Kit articolatori

Kit SAM SE

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 601K	REF ART 602K	REF ART 616MK	REF ART 617MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 600	✓	✓		
REF ART 615M			✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 334	✓	✓	✓	✓
REF ATB 397	✓	✓	✓	✓
REF ART 598SE	✓	✓	✓	✓

REF ART 600



Articolatore SAM SE

REF ART 615M



Articolatore SAM SE

REF ART 120

Basette di montaggio
avvitabili gialle 6+2

REF MPS 150

Basette di montaggio
magnetiche gialle 6+2

REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395

Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303

Arco di trasferimento
AXIOQUICK III

REF ATB 240

Copri-olive auricolari
(3x6 pz.)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 334



Supporto in acrilico XL

REF ATB 397



Supporto di trasferimento SE

REF ART 598SE



Valigia trasparente da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM NEO

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 651K	REF ART 652K	REF ART 651MK	REF ART 652MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 650S	✓	✓		
REF ART 650M			✓	✓
REF ART 625	✓	✓	✓	✓
REF ART 526	✓	✓	✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 334	✓	✓	✓	✓
REF ATB 397	✓	✓	✓	✓
REF ART 598NEO	✓	✓	✓	✓

REF ART 650S



Articolatore SAM NEO

REF ART 650M



Articolatore SAM NEO

REF ART 120

Basette di montaggio
avvitabili gialle 8+2

REF MPS 150

Basette di montaggio
magnetiche gialle 8+2

REF ART 625



Antenna superiore per NEO

REF ART 526



Supporti posteriori

REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395

Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303

Arco di trasferimento
AXIOQUICK III

REF ATB 240

Copri-olive auricolari
(3x6 pz.)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 334



Supporto in acrilico XL

REF ATB 397



Supporto di trasferimento SE

REF ART 598NEO



Valigia trasparente da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 2P

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 301K	REF ART 304K	REF ART 316MK	REF ART 319MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 300	✓	✓		
REF ART 315M			✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 334	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 300



Articolatore SAM 2P

REF ART 315M



Articolatore SAM 2P

REF ART 120

Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150

Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2

REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395

Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303

Arco di trasferimento
AXIOQUICK III

REF ATB 240

Copri-olive auricolari
(3x6 pz.)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 334



Supporto in acrilico XL

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 599



Valigia da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 2P

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 322K	REF ART 323K	REF ART 337MK	REF ART 338MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 300	✓	✓		
REF ART 315			✓	✓
REF ART 338			✓	✓
REF ART 339	✓	✓		
REF ART 336	✓	✓	✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303+394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 180	✓	✓	✓	✓
REF ART 170	✓	✓	✓	✓
REF MOH 560	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 300



Articolatore SAM 2P
con piatto incisale regolabile

REF ART 315M



Articolatore SAM 2P
con piatto incisale regolabile

REF ART 120



Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150



Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2

REF ATB 338



Base magnetica per supporto
telescopico, MPS

REF ATB 339



Base magnetica per supporto
telescopico

REF ATB 336



Supporto forchetta
telescopico

REF ATB 305



Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395



Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303 + 240



Arco AXIOQUICK III +
copri-olive auricolari (3x6 pz)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 180



Assortimento inserti
di protrusione

REF ART 170



Assortimento guide
di Bennett I

REF MOH 560



Aiuto di montaggio con
30 astine elastiche

REF ART 599



Valigia da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 2PX

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 401K	REF ART 402K	REF ART 416MK	REF ART 417MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 400	✓	✓		
REF ART 415M			✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 334	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 400



Articolatore SAM 2PX

REF ART 415M



Articolatore SAM 2PX

REF ART 120

Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150

Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2

REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395

Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303

Arco di trasferimento
AXIOQUICK III

REF ATB 240

Copri-olive auricolari
(3x6 pz)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 334



Supporto in acrilico XL

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 599



Valigia da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 2PX

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 422K	REF ART 423K	REF ART 437MK	REF ART 438MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 400	✓	✓		
REF ART 415M			✓	✓
REF ATB 338			✓	✓
REF ATB 339	✓	✓		
REF ATB 336	✓	✓	✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 440	✓	✓	✓	✓
REF MOH 560	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 400



Articolatore SAM 2PX con piatto e asta incisale regolabili

REF ART 415M



Articolatore SAM 2PX con piatto e asta incisale regolabili

REF ART 120



Basette di montaggio avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150



Basette di montaggio magnetiche gialle 20+2

REF ATB 338



Base magnetica per supporto telescopico, MPS

REF ATB 339



Base magnetica per supporto telescopico

REF ATB 336



Supporto forchetta elascopico

REF ATB 305



Gruppo forchetta I-NT completo

REF ATB 395



Gruppo forchetta AX completo

REF ATB 303



Arco AXIOQUICK III +

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 240



Copri-olive auricolari (3x6 pz)

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 440



Assortimento guide di Bennett e piani-guida PX

REF MOH 560



Aiuto di montaggio con 30 astine elastiche

REF ART 599



Valigia da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 3

	Versione basette avvitabili		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 501K	REF ART 502K	REF ART 516MK	REF ART 517MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 500	✓	✓		
REF ART 515M			✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 334	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 500



Articolatore SAM 3

REF ART 515M



Articolatore SAM 3

REF ART 120

Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150

Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2

REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT
completo

REF ATB 395

Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303

Arco di trasferimento
AXIOQUICK III

REF ATB 240

Copri-olive auricolari
(3x6 pz)

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 334



Supporto in acrilico XL

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 599



Valigia da trasporto

Kit articolatori

Kit SAM 3

	Versione basette avvitali		Versione basette magnetiche MPS	
	REF ART 551K	REF ART 552K	REF ART 566MK	REF ART 567MK
	REF ART 120		REF MPS 150	
REF ART 550	✓	✓		
REF ART 565M			✓	✓
REF ATB 338			✓	✓
REF ATB 339	✓	✓		
REF ATB 336	✓	✓	✓	✓
REF ATB 305	✓		✓	
REF ATB 395		✓		✓
REF ATB 303	✓	✓	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓	✓	✓
REF ATB 394	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓	✓	✓
REF ART 548	✓	✓	✓	✓
REF MOH 560	✓	✓	✓	✓
REF ART 599	✓	✓	✓	✓

REF ART 550



Articolatore SAM 3 con piatto e asta incisale regolabili

REF ART 565M



Articolatore SAM 3 con piatto e asta incisale regolabili

REF ART 120



Basette di montaggio avvitali gialle 20+2

REF MPS 150



Basette di montaggio magnetiche gialle 20+2

REF ATB 338



Base magnetica per supporto telescopico, MPS

REF ATB 339



Base magnetica per supporto telescopico

REF ATB 336



Supporto forchetta telescopico

REF ATB 305



Gruppo forchetta I-NT completo

REF ATB 395



Gruppo forchetta AX completo

REF ATB 303



Arco AXIOQUICK III +

REF ATB 394



Supporto nasale AX - S

REF ATB 240



Copri-olive auricolari (3x6 pz)

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ART 548



Assortimento guide di Bennett e piani-guida

REF MOH 560



Aiuto di montaggio con 30 astine elastiche

REF ART 599



Valigia da trasporto

Strumenti per articolatori

REF ART 368**Indicatore piano oclusale 3D**

Calotta trasparente che può essere ruotata e angolata grazie alla scala graduata da 0° a 45° e asta incisale IIPA asimmetrica (ART 361). Per migliorare la visuale del gruppo anteriore nella protesi totale. Per tutti gli articolatori SAM.

**REF ART 385****Kit indicatore piano oclusale**

Contiene un indicatore piano oclusale piatto (ART 366) e uno curvo (ART 580), inclinabile sia in senso verticale che sagittale con scala graduata da 0° a 45°, per protesi totale. Per il montaggio dei modelli da pantografo senza arco di trasferimento, per tutti gli articolatori SAM.

**REF ART 385JK****Kit indicatore piano oclusale JK**

Contiene un indicatore piano oclusale piatto (ART 366) e uno curvo (ART 580) secondo la curvatura Speesche & Wilson nonché un piano oclusale piatto (ART 366JK) per alloggiare l'inserto oclusale KOIS, inclinabile sia in senso verticale che sagittale con scala graduata da 0° a 45°, per protesi totale. Per il montaggio dei modelli da pantografo senza arco di trasferimento, per tutti gli articolatori SAM.

**REF ART 393****Strumento impronta denti anteriori IDEA**

Per rilevare l'impronta dei denti anteriori in articolatore, per tutti gli articolatori SAM.

Dimensione della paletta:
P40 x L60 x H20

**REF ART 394****Strumento impronta denti anteriori IP**

Per rilevare l'impronta dei denti anteriori in articolatore, per tutti gli articolatori SAM.

Dimensione della paletta:
P20 x L50 x H15

**REF ART 591****Kit AXIOSPLINT GS**

Sec. Prof. Dr. A. Gutowski e ODTM J. Stegmaier - Calotta curva trasparente per il montaggio dei denti, ancorata a un solo punto e asta incisale GS, per sistema SAM Axiosplit. Per la semplice e rapida preparazione di splint occlusali e semi permanenti in resina fotopolimerizzabile. Utilizzabile solo in combinazione con Axiosplit (non con sistemi di piastre di montaggio magnetiche a vite o MPS).

**REF ART 491****Indicatore piano di Stuart by Mdt. Claudio Nannini**

Strumento di definizione incisale per stabilire il corretto angolo incisale rispetto all'asse cerniera, in funzione della classe scheletrica del paziente. Include un blocco della guida con possibilità di movimento laterale ($\pm 7,5$ mm) e tre perni sagittali regolabili (80 - 120 mm) con aghi incisali angolati e regolabili (± 10 mm).



Pazienti in Classe 2



Pazienti in Classe 1



Pazienti in Classe 3



Servizio di incisione SAM

Personalizzazione del proprio dispositivo



Unico e preciso



REF REP 003

Incisione secondo specifiche indicazioni

Questo servizio richiede un tempo di realizzazione di ca. 3-5 giorni lavorativi. Lo spazio per l'incisione dipende dalle dimensioni del dispositivo e quindi può essere limitato. Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

AXIOQUICK®

NT

Kit arco di trasferimento III

REF ATB 350K

Kit arco di trasferimento AXIOQUICK III - NT

Contiene un arco di trasferimento AXIOQUICK® III (ATB 303), un gruppo forchetta I-NT (ATB 305), un supporto nasale (ATB 394) e sei copri-olive azzurre. Collegamento perfetto ed economico, ma sicuro e privo di torsione dell'arco di trasferimento e del gruppo forchetta.



AX

Kit arco di trasferimento III

REF ATB 390K

Kit arco di trasferimento AXIOQUICK III - AX

Contiene un arco di trasferimento AXIOQUICK® III (ATB 303), un gruppo forchetta AXIOMATIC® (ATB 395), un supporto nasale AX (ATB 394) e sei copri-olive azzurre. Un alto livello di perfezione tecnica basato su cuscinetti a sfera, permette il collegamento sicuro e privo di torsione dell'arco di trasferimento e del gruppo forchetta.





REF ATB 235

Indicatore di repere

Per arco anatomico di trasferimento per fissare dei punti di riferimento nella zona anteriore



REF ATB 240

Copri-olive auricolari

(200 pezzi) protezioni azzurre monouso per rivestire le olive auricolari nere dell'arco di trasferimento AXIOQUICK e AXIOGRAPH III, assicurano un migliore posizionamento e miglior comfort per il paziente.



REF ATB 303

Arco di trasferimento AXIOQUICK III

Fornito senza accessori.



REF ATB 304

Supporto nasale

Regolabile verticalmente.



REF ATB 305

Gruppo forchetta I-NT

Completo, con forchetta e fissaggio NT.



REF ATB 309

Supporto nasale JSM

Supporto nasale universale, sec. Odt. J. Schweiger per la presa di diversi punti di repere: FH, PH, AT o CE e/o per allinearsi con il centro del viso.



REF ATB 325

Forchetta NT

In due pezzi, costituita da una forchetta AX (ATB 396) per gruppo forchetta AX e da un adattatore per forchetta (ATB 326), per l'impiego con AXIOQUICK I-NT (ATB 305) e AXIOGRAPH.



REF ATB 326

Adattatore forchetta NT

Permette di collegare la forchetta AX (ATB 396) al gruppo forchetta NT.



REF ATB 386

Forchetta AX-P

Tipo corto per bambini (pediatria).



REF ATB 394

Supporto nasale AX-S

Con appoggio nasale morbido, asta di livellamento interpupillare, per tutti gli archi di trasferimento SAM.



REF ATB 395

Gruppo forchetta AX

Tipo AXIOMATIC con sicuro meccanismo singolo di fissaggio e forchetta AX rimovibile.



REF ATB 396

Forchetta AX

per gruppo forchetta AXIOMATIC, asportabile per il trasporto e poi riposizionabile in modo sicuro, sterilizzabile.



Per maggiori informazioni, consultare il manuale ATB.

AxioQuick Recorder 3D

Il nuovo sistema di registrazione del movimento mascellare con tecnologia a sensori ottici.

REF AQR 300

AQR-OPTIC, WLAN, by Zebris Medical

L'AQR OPTIC si basa sul sistema Zebris JMA Optic ed è un sistema di registrazione del movimento mascellare con tecnologia a sensori ottici.

È composto da:

- un archetto pratico e leggero con telecamere e processori
- un piccolo e leggero sensore mandibolare con supporto magnetico
- due sistemi di fissaggio mandibolare (occlusale e paraocclusale)
- ulteriori accessori
- imballo in valigetta di alluminio di alta qualità

La posizione e i movimenti condilari possono essere registrati con elevata precisione. Il campo di applicazione spazia dalla realizzazione di restauri dentali funzionali alla progettazione, documentazione e controllo della riabilitazione stomatognatica.

Il sistema può essere gestito tramite interfaccia USB o in wireless tramite WLAN.

I dati reali del paziente o i valori di impostazione dell'articolatore possono essere trasferiti a sistemi esterni tramite l'esportazione XML standardizzata.



REF AQR 301

Arco elettronico superiore



REF AQR 302

Sensore inferiore



REF AQR 304

Arco C con puntatore



REF AQR 305

Cucchiaino paraocclusale inferiore



REF AQR 306

Adattatore occlusale



REF AQR 307

Attacchi occlusali
(3 pezzi) monouso.



REF AQR 308

Forchetta tipo SD



REF AQR 309

Adattatore forchetta SD

Ulteriore contenuto:

cavo USB, alimentatore USB, software di base (incl. articolatore ed esportazione dati XML), chiavetta USB con 3 licenze + codice WiFi, guida rapida, quota annuale obbligatoria per il contratto di manutenzione del software, valigetta da trasporto (SAM).

AXIOQUICK® Recorder



Misurazione a ultrasuoni 3D per diagnosi e terapia

REF AQR 100

AXIOQUICK RECORDER II

Dispositivo elettronico di registrazione composto da ricevitori a ultrasuoni e supporto nasale (ATB 394), arco con trasmettitori a ultrasuoni, aste di rilevamento Porion (un paio), elastico nucale, striscia Vertex, marcatore di repere, asta asse cerniera, cucchiaino di registrazione occlusale (AQR 223), cucchiaino paraocclusale (AXO 222), elemento d'interfaccia, elemento di rete, interruttore a pedale, cavetto USB e laptop con software preinstallato (32 bit), valigia da trasporto.



REF AQR 150

AXIOQUICK RECORDER II - AXO

Strumento aggiuntivo per assiografo meccanico. Il sistema di rilevamento elettronico AQR 100 con trasmettitori a ultrasuoni e sensori di ricezione può essere integrato nell'Axigraph. Su richiesta, è possibile costruire i sensori a ultrasuoni sui vostri assiografi. Contiene sensori per la testa con ricevitori a ultrasuoni, pezzo angolare per il fissaggio all'assiografo, sensori madibolari con trasmettitori a ultrasuoni, aste di rilevamento Porion (un paio), elastico nucale, striscia Vertex, marcatore di repere, asta asse cerniera, cucchiaino di registrazione occlusale (AQR 223), cucchiaino paraocclusale (AXO 222), elemento d'interfaccia, elemento di rete, interruttore a pedale, cavetto USB e laptop con software preinstallato (32 bit), valigia da trasporto.



REF AQR 221

Fissaggio NT/magnetico Z



REF AQR 222

Cucchiaino paraocclusale con fissaggio magnetico Z



REF AQR 223


Cucchiaino occlusale con fissaggio magnetico Z



REF AQR 226K

AQR kit cucchiaini

Adattatore paraocclusale, cucchiaino di registrazione N, adapter paraocclusale di registrazione AXIODAPT normale e per protesi totale con fissaggio NT e fissaggio magnetico Z e chiave a brugola.

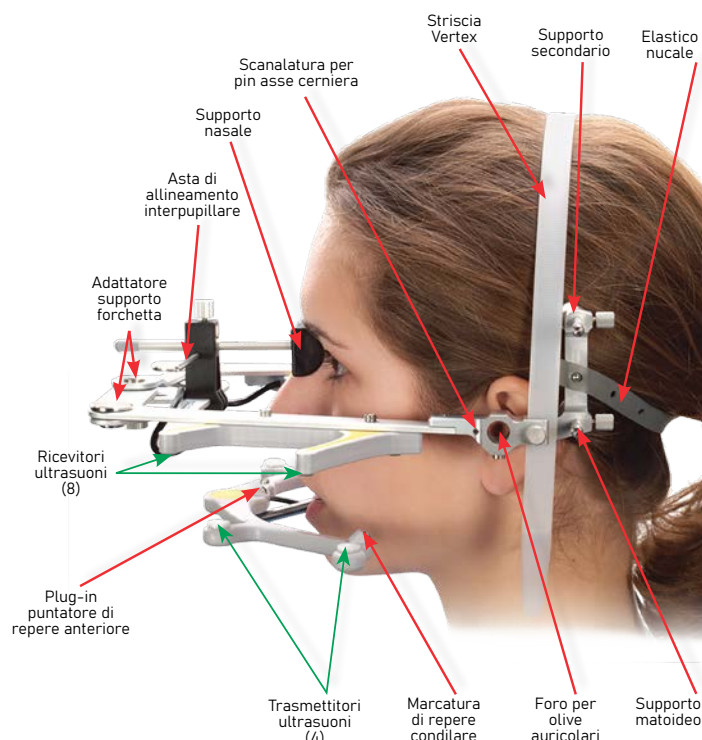

L'AXIOQUICK Recorder é la combinazione del nuovo arco facciale anatomico con un dispositivo di registrazione elettronica senza contatto. Quattro trasmettitori ad ultrasuoni e otto ricevitori rilevano i movimenti mandibolari. Le esatte misurazioni dei percorsi condilari e la guida anteriore vengono visualizzate sia graficamente che numericamente rispetto a un piano di riferimento.




Permette una rapida registrazione per programmare l'articolatore fornendo i dati necessari per un'ampia diagnostica funzionale e, in aggiunta, offrire approfondite misurazioni della posizione e dei movimenti mandibolari con sincrona registrazione EMG. Contemporaneamente il modello superiore può essere trasferito in articolatore.




L'assiogramma é la presentazione grafica cartesiana delle misurazioni. Con la riproduzione delle registrazioni in forma di animazione viene resa possibile una valutazione diagnostica speciale. Angoli e distanze possono essere valutati con precisione.

Il Porion-Orbitale (piano di Francoforte orizzontale / piano asse-orbitale) é il piano di riferimento per tutte le misurazioni e il posizionamento accurato del modello superiore in riferimento al cranio. Ciò assicura una corretta e fedele riproduzione dei percorsi condilari e della guida anteriore in riferimento alle registrazioni.

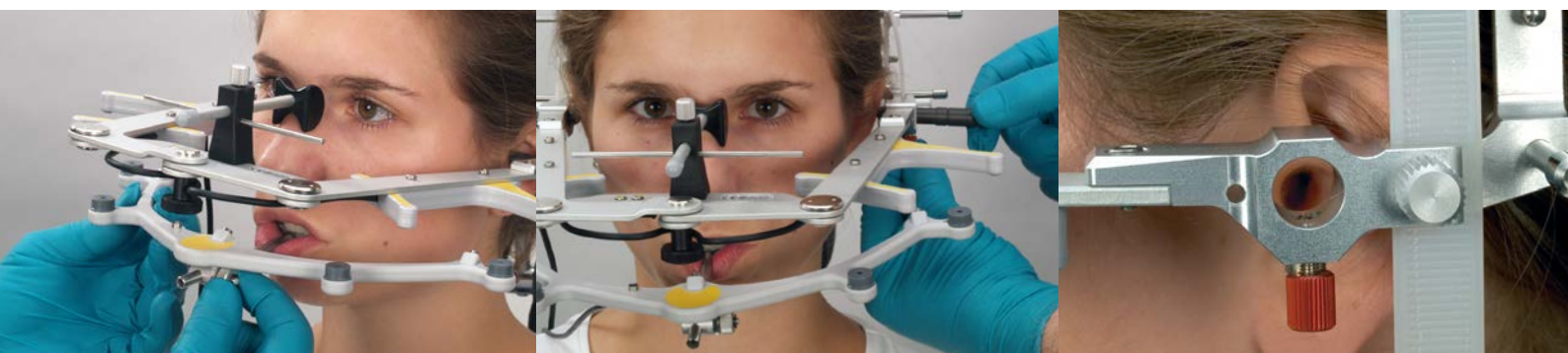

Sono possibili presentazioni 3D della guida anteriore, del triangolo di Bonwill e dei movimenti mandibolari dalla CT.

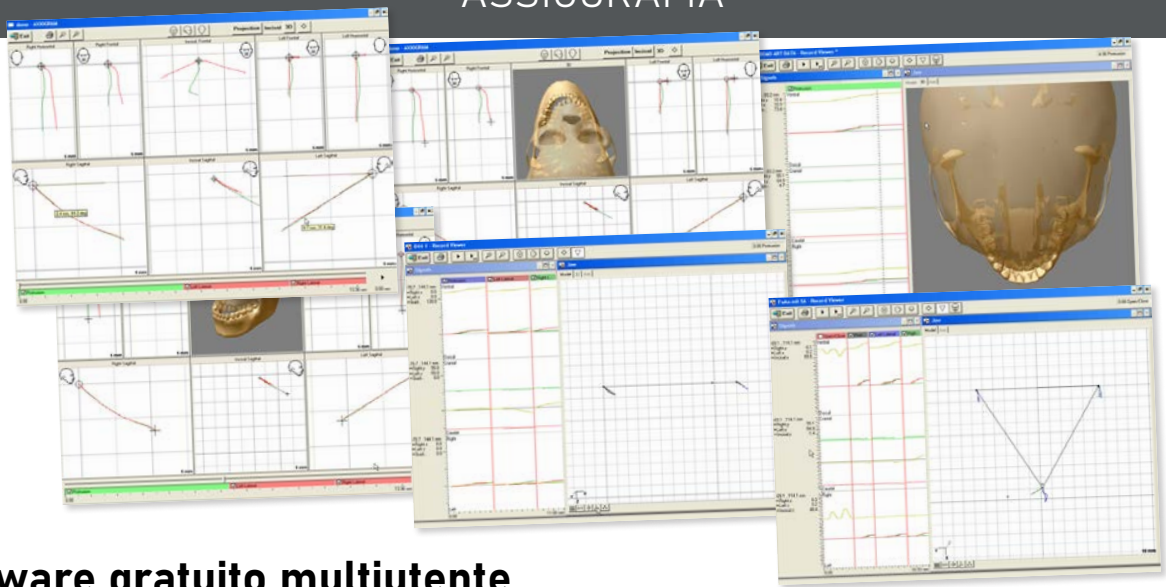

Software gratuito multiutente

L'elettronica funziona secondo il principio della registrazione del tempo di transito di impulsi ultrasonici. La posizione dei denti e il movimento della mandibola possono essere calcolati in modo molto simile alla navigazione satellitare. Il programma CPA (analisi della posizione condilare) mette in relazione la registrazione del paziente ad una griglia contenente fino a 10

punti di riferimento. Questa diagnosi è precisa come quella realizzabile con il MPI. La posizione dell'asse cerniera si ricava da un triplo movimento di apertura che il computer calcola rapidamente. In alternativa, può anche essere calcolato manualmente e visivamente a schermo seguendo i ben noti principi di gnatologia.

AXIOGRAPH® III KIT

Strumento di registrazione collineare per l'analisi diagnostica dell'ATM e per l'esatto trasferimento dei modelli. Versione meccanica abbinabile all'Ultrasonic AXIOGRAPH® con dispositivo di montaggio dell'asse cerniera, in valigia da trasporto



REF AXO 501K

per sistema di basette avvitabili

REF AXO 516MK

per sistema di basette magnetiche MPS



AXO 442



AXO 443



AXO 290



AXO 530/545M



AXO 112



AXO 299



AXO 315



AXO 475



AXO 461



ATB 305001



AXO 220



AXO 450



AXO 470



AXO 106



AXO 109



AXO 295



AXO 180



AXO 503



AXO 275



AXO 270



AXO 265



AXO 310



AXO 111



AXO 110



AXO 465



AXO 105



AXO 159

* AXO 530 per sistema di basette avvitabili e AXO 545M per sistema di basette magnetiche MPS

Ricambi assiografo



REF AXO 105

Righello per AXIOGRAPH
In acciaio, 200 mm, per misurare la distanza dei registri / bandiere



REF AXO 110

Fogli registrazione
(50 fogli) per le valutazioni con l'AXIOGRAPH



REF AXO 111

Etichette di registrazione Verdi, (15 fogli) con griglia millimetrata autoadesiva, 4 paia di etichette per foglio.



REF AXO 112

Etichette millimate Rosse, (2 fogli) con scala millimetrata su etichetta trasparente, 60 pezzi per foglio.



REF AXO 220

Cucchiaio di registrazione N
Per AXIOGRAPH e AXIOQUICK Recorder.



REF AXO 222

Adattatore paraocclusale
Per la preparazione di un adattatore individuale di registrazione, per AXIOGRAPH e AXIOQUICK Recorder.



REF AXO 334

Adattatore paraocclusale di registrazione
Per protesi totale con cacciavite esagonale, 2 mm. Indicato come supporto, per protesi rimovibili, in registrazione.



REF AXO 340K

Kit adattatore articolatore
Contiene un'asta incisale asimmetrica (ART 361) con asta orizzontale per arco di traferimento e ganci, per il montaggio di cucchiari paraocclusali sull'articolatore, per AXIODAPT.



REF AXO 350

Gancio mandibolare edentulo
Per il fissaggio dell'adattatore di registrazione, per AXIODAPT edentulo.



REF AXO 461

Adattatore supporto forchetta
Per AXIOGRAPH III.




REF AXO 503

Solvente
10 ml facilita il distacco delle etichette Axiograph e MPI.



REF AXO 505

Cera di indicazione occlusale
Verde, 300 µm, per verificare i contatti occlusali.

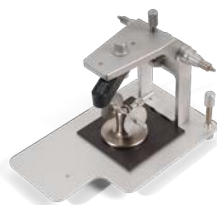

REF AXO 530

per sistema di basette avvitabili
Dispositivo di montaggio dell'asse cerniera
Con funzionamento a mandrino per l'estensione simmetrica degli assi, trasferimento esatto del modello della mascella superiore tramite l'assiografo.

REF AXO 545M

per sistema di basette magnetiche MPS

AXIOSPLIT Starter kit

REF ASP 509K



AXIOSPLIT Starter Kit N con magnete normale

REF ASP 510K



AXIOSPLIT Starter Kit S con super magnete

Contengono un dispositivo AXIOSPLIT di normalizzazione P con asta normalizzata (ASP 470), una basetta superiore a un pezzo (ASP 529 o ASP 530), una basetta inferiore a due pezzi (ASP 539 o ASP 540), due anelli di sicurezza (ASP 435) e 20 basette di montaggio ovali (ASP 420).

AXIOSPLIT Kit articolatori

REF ASP 514K



AXIOSPLIT kit articolatore N con magnete normale

REF ASP 515K



AXIOSPLIT kit articolatore S con super magnete

Per utilizzare altri articolatori con dispositivo di normalizzazione, contiene una basetta a un pezzo superiore (ASP 529 o ASP 530) con magnete, una basetta a due pezzi inferiore (ASP 539 o ASP 540) con magnete, due anelli di sicurezza (ASP 435)

AXIOSPLIT pezzi singoli



REF ASP 529

Basetta AXIOSPLIT N, 1 pezzo
Basetta avvitabile superiore fornita di magnete normale.



REF ASP 530

Basetta AXIOSPLIT S, 1 pezzo
Basetta avvitabile superiore fornita di super magnete.



REF ASP 539

Basetta AXIOSPLIT N, 2 pezzi
Basetta avvitabile inferiore fornita di magnete normale.



REF ASP 540

Basetta AXIOSPLIT S, 2 pezzi
Basetta avvitabile inferiore fornita di super magnete.




REF ASP 590

Supporto modelli a sfera AXIOSPLIT S
Supporto basculabile per fresatore e parallelometro con super magnete.

Basette di montaggio avvitabili

- Monouso
- Sperimentate da oltre 40 anni
- Ottima superficie ritentiva (cono negativo)
- In plastica rinforzata con fibra di vetro
- Avvitamento in metallo per un sicuro, molteplice montaggio

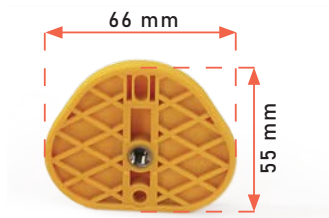

Utilizzabili non solo sugli articolatori SAM, ma anche WhipMix, Denar, Panadent, AD2, Hanau Ulti Mate, Hanau 2Pin.



Viti di fissaggio

REF ART 114

(1 paio) compreso chiave a brugola per il montaggio sull'elemento superiore e inferiore degli articolatori SAM o di altri articolatori.



Basette di montaggio avvitabili - 66 x 55 mm
(20 pezzi)

REF ART 120




Basette di montaggio avvitabili - 66 x 55 mm
(100 pezzi)

REF ART 124

Basette di montaggio AXIOSPLIT



- A tre raggi
- Economiche
- Disponibili in due forme: ovale e rotonda
- Per l'originale sistema split cast brevettato
- Controllo splitcast sulle superfici inclinate
- Rimozione rapida e riposizionamento sicuro

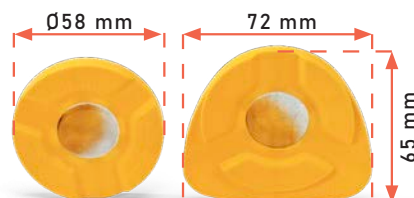

Basette di montaggio AXIOSPLIT ovali - 72 x 65 mm



REF ASP 420
(20 pezzi)

REF ASP 422
(100 pezzi)



Basette di montaggio AXIOSPLIT tonde - ø 58 mm



REF ASP 425
(20 pezzi)

REF ASP 427
(100 pezzi)




Doppia base con anello AXIOSPLIT

Con anelli in gomma per la preparazione dello zoccolo secondario in gesso.

REF ASP 451

Basette di montaggio magnetiche MPS gialle

- Monouso
- Sicuro riposizionamento dei modelli
- Rapida sostituzione dei modelli sull'articolatore
- Con bottone ritentivo zincato
- Possibilità di convertire in un secondo tempo tutti gli articolatori SAM
- In plastica rinforzata con fibra di vetro
- Sistema di basette magnetiche brevettato
- Le basette gialle si adattano anche agli articolatori WhipMix, Panadent e Hanau 2Pin

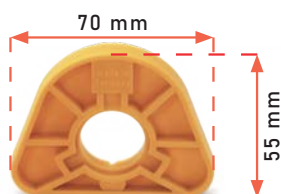

Basette di montaggio magnetiche gialle MPS - 70 x 55 mm con bottoni ritentivi



REF MPS 150
(20 pezzi)

REF MPS 155
(100 pezzi)



REF MPS 100K

Starter kit basette di montaggio magnetiche MPS gialle

Contiene due porta-magneti (M 5x13 mm) con dado (chiuso) e chiave gialla (MPS 110), aiuto di centratura (MPS 111) e 20 basette di montaggio gialle con bottoni ritentivi (MPS 150), per articolatori SAM, WhipMix, Panadent e Hanau 2Pin.




REF MPS 101K

KIT DI CONVERSIONE MPS GIALLO PER ARTICOLATORE

A completamento dello starter kit, contiene due porta-magneti (M 5x13 mm) con dado (chiuso) e chiave gialla, per trasformare in MPS gli articolatori SAM, WhipMix, Panadent, Denar, AD2, Hanau Ulti Mate e Hanau 2Pin.



Basette di montaggio magnetiche MPS grige

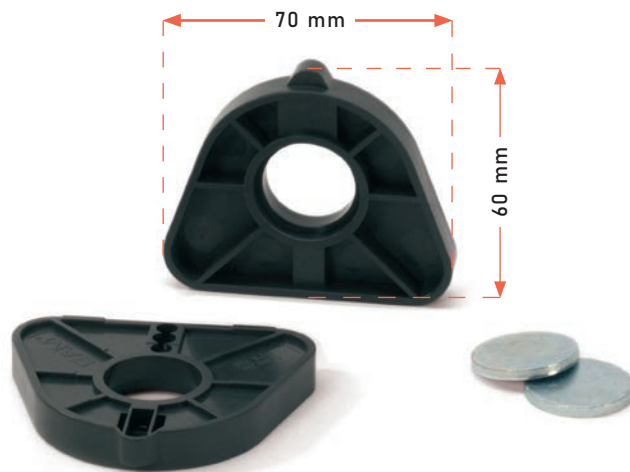

Utilizzabili sugli articolatori Artex, KaVo, Denar, Quick, Balance e Dental-Hoby.

Non intercambiabile tra diversi produttori di articolatori.

Basette di montaggio MPS grige 70 x 60 mm per Artex, KaVo Protar, Denar, Dental Hoby e Quick Balance con bottoni ritentivi



REF MPS 250
(20 pezzi)



REF MPS 255
(100 pezzi)



Kit I MPS per AD2, Artex, KaVo PROTAREvo, Denar, Dental Hoby, Panadent, Whip Mix e Quick Balance

Starter Kit MPS, grigio I



REF MPS 200K

Contenuto: 2 porta-magneti (M 5x17mm) con 2 dadi (aperto e chiuso), chiave gialla, aiuto di centratura (MPS 111) e 20 basette di montaggio grigie con bottoni ritentivi (MPS 250).

REF MPS 201K

Contenuto: 2 porta-magneti (M 5x17mm) con 2 dadi (aperto e chiuso), chiave gialla, aiuto di centratura (MPS 111) e 2 basette di montaggio grigie con bottoni ritentivi.

Kit conversione articolatore, grigio I



Starter Kit MPS GK, grigio III



REF MPS 220K

Contenuto: 2 porta-magneti (M 5x13mm) con 2 dadi (aperto e chiuso), chiave gialla, aiuto di centratura (MPS 111) e 20 basette di montaggio grigie con bottoni ritentivi (MPS 250).

REF MPS 221K

Contenuto: 2 porta-magneti (M 5x13mm) con 2 dadi (aperto e chiuso), chiave gialla, aiuto di centratura (MPS 111) e 2 basette di montaggio grigie con bottoni ritentivi.

Kit conversione articolatore, grigio III



Accessori



REF ATB 334

Supporto XL in acrilico
Per sostenere la forchetta
durante il montaggio del
modello superiore o inferiore.



REF ATB 336

Supporto telescopico
Per sostenere la forchetta
durante il montaggio del
modello superiore.



REF ATB 339

Base magnetica x ATB 336
Per sistema di basette
avvitabili.



REF ATB 338

Base magnetica x ATB 336
Per sistema di basette
magnetiche MPS.



REF MOH 560

Aiuto di montaggio
Per il montaggio in centrica
del modello inferiore con
articolatore SAM 2P, 2PX,
3 e NEO, con dispositivo di
bloccaggio del modello e 30
astine elastiche.




REF MOH 124


Astine elastiche
(30 pezzi) in plastica per bloccare
i modelli.



Supporti di trasferimento

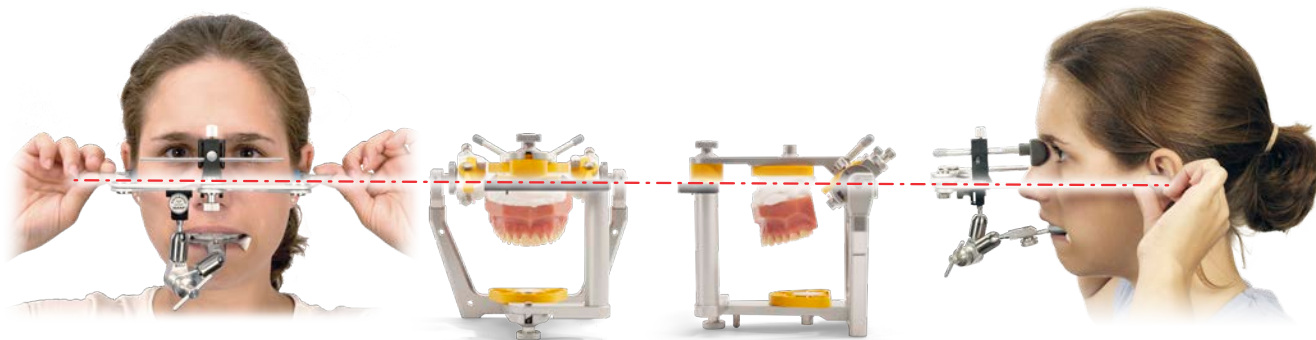

L'obiettivo: trasferire la situazione del paziente nell'articolatore nel modo più preciso possibile.
La soluzione: il sistema di trasferimento SAM

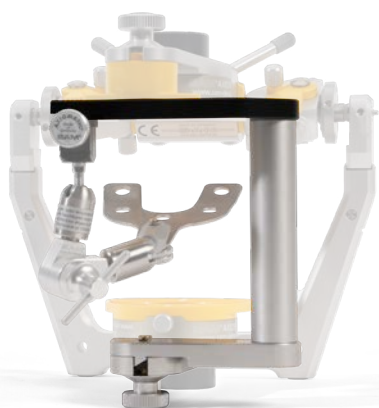

Simmetria anatomica nell'articolatore per il montaggio individuale del modello. L'arco di trasferimento rimane nello studio dentistico, il supporto forchetta viene inviato al laboratorio odontotecnico.



REF ATB 398

Supporto di trasferimento AX

Per facilitare e rendere sicuro il montaggio del modello superiore negli articolatori SAM SE, NEO, 2P, 2PX, 3 (standard P) e nello strumento di montaggio.



REF ATB 397

Supporto di trasferimento SE
In plastica per il semplice e sicuro montaggio del modello superiore.



REF ATB 457K

Supporto di trasferimento 2C
Telaio nero di 77 mm, per la vecchia altezza dei SAM 2C (barra orizzontale argento).


Tutte le varianti di gruppo forchetta SAM sono compatibili con il supporto di trasferimento AX. La posizione del mascellare superiore del paziente può essere trasferita in modo rapido e preciso sull'articolatore utilizzando il supporto di trasferimento.

Supporti di trasferimento per altri articolatori

Con l'arco anatomico di trasferimento SAM e gli speciali supporti di trasferimento, è possibile montare il modello superiore anche sui principali articolatori non di marca SAM. Vengono prese in considerazione e calibrate all'altezza dell'asse orbitale, diverse altezze e tipologie costruttive. Sulla base del modello del supporto di trasferimento AX, tutti i gruppi forchetta SAM con guida scorrevole (ATB 395, ATB 305, ATB 310, ATB 320) possono essere utilizzati per il trasferimento del modello superiore.

Panadent

REF ATB 453K

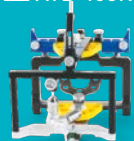

SUPPORTO - P
per Panadent basso

WhipMix

REF ATB 455K



SUPPORTO - WM 8
per WhipMix serie 8000

Denar

REF ATB 461K



SUPPORTO - D
per Denar (Mark 2, D5a...)

KAVO

REF ATB 464K



SUPPORTO - K
per Protar

Hanau

REF ATB 466K



SUPPORTO - H
per Modular

REF ATB 473K



SUPPORTO - WM2PH
per Panadent

REF ATB 473K



SUPPORTO - WM2PH
per WhipMix serie 2000

REF ATB 481K



SUPPORTO - D3
per Denar serie 300

REF ATB 464K



SUPPORTO - K
per Protar EVO

REF ATB 466K



SUPPORTO - H
per Modular Wide-View

REF ATB 475K



SUPPORTO - WM 3
per WhipMix serie 3000

Amann-Girrbach

REF ATB 462K



SUPPORTO - G
per Artex

REF ATB 462K



SUPPORTO - G
per Artex Carbon

Stratos

REF ATB 477K



SUPPORTO - ST1
per Stratos 100



REF MSF 100K

Kit combinato sistema splitcast magnetico

Contiene tutte le 4 basi disponibili per sistema splitcast, la rossa (standard 80 mm), la nera (reciproca 80 mm), la gialla (piccola 70 mm), la verde (XL 110 mm), 4 anelli in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti, 6 bottoni ritentivi e 1 isolante spray UG-Sep



REF MSF 102

Flacone rifornimento UG-Sep (500 ml) isolante universale gesso/gesso.



REF MSF 105

Flacone spray UG-Sep (50 ml) isolante universale gesso/gesso.



REF MSF 110

Bottoni ritentivi scanalati (50 pezzi) per sistema splitcast magnetico.



REF MSF 120

Porta-magneti (50 pezzi) per magneti MSF.



REF MSF 121

Magneti per MSF (20 pezzi) con asportatore-magneti.



REF MSF 150K

Mini kit MSF per studenti. Contiene 6 porta-magneti, 6 bottoni ritentivi e 6 magneti.



REF MSF 200K

Kit splitcast magnetico rosso. Tipo standard, con base da 80 mm, 1 anello in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti e 6 bottoni ritentivi.



REF MSF 250K

Kit splitcast magnetico nero. Tipo reciproco, con base da 80 mm, 1 anello in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti e 6 bottoni ritentivi.



REF MSF 300K

Kit splitcast magnetico giallo. Tipo piccolo, con base da 70 mm, 1 anello in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti e 6 bottoni ritentivi.



REF MSF 350K

Kit splitcast magnetico verde. Tipo extra grande, con base da 110 mm, 1 anello in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti e 6 bottoni ritentivi.



REF MSF 450K

Kit di boxaggio XL, verde

Contiene 2 basi splitcast XL verdi, 1 anello in plastica, 1 anello in gomma, 1 asta distanziatrice, plastilina, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti, 6 bottoni ritentivi, per mantenere i margini funzionali nella protesi totale.



REF MSF 526

Starter Kit DISPOSPLIT

Contiene 6 basette per zoccolatura rapida con anello in gomma, 1 asportatore-magneti, 6 magneti, 6 porta-magneti e 6 bottoni ritentivi.



REF MSF 527

Basette bianche DISPOSPLIT

Confezione da 25 basette, con 25 porta-magneti, 25 magneti e 25 bottoni ritentivi.





REF MSF 600

AXIODRILL II foragessi, 230 Volt

Foragessi orizzontale che permette l'ottimale posizionamento del modello grazie ai riferimenti riportati; è corredata di misuratore della profondità e di chiave a brugola per il fissaggio della fresa.



REF MSF 503

Frese AXIOPIN 1,6 mm (3 pezzi) per perni paralleli e conici, mandrino 3,0 mm



REF MSF 504

Perni conici per ceramica (24 pezzi), riutilizzabili, per duplicazioni di monconi dentali.



REF MSF 520K

Starter Kit AXIOPIN
Contiene 200 perni, 200 guaine e 1 fresa.



REF MSF 510

AXIOPIN in AXIOBOX
Contiene 1.000 perni e 1.000 guaine.



REF MSF 509

Rifornimento AXIOPIN
Contiene 1.000 perni e 1.000 guaine.

REF MSF 511

AXIOPIN solo perni
Contiene 1.000 perni.

REF MSF 512

AXIOPIN solo guaine
Contiene 1.000 guaine.

REF MSF 513

AXIOPIN BP
Confezione grande con 10.000 perni e 10.000 guaine.

Strumenti di misurazione dell'espansione


La necessità del controllo di gesso o rivestimento in studio o laboratorio nasce dal fatto che questi materiali hanno lotti differenti di produzione, dalla qualità dell'acqua utilizzata, dal dosaggio individuale e dai metodi di lavorazione impiegati.

Gli strumenti di misurazione dell'espansione EMI sono stati sviluppati specificatamente per analizzare l'espansione dei gessi dentali. La precisione degli orologi è pari a 0,01mm. L'espansione può quindi essere facilmente convertita in percentuale, poiché la vaschetta ha una lunghezza di 100 mm ($0,01 \text{ mm} \pm 0,1\%$). Per evitare l'adesione dei materiali da testare, si consiglia di rivestire la vaschetta con un materiale da diga (0,1 - 0,2mm) o cospargerlo di talco.



REF EMI 100

Misuratore dell'espansione
Tipo analogico, con orologio meccanico e precisione di $0,01 \text{ mm} \pm 0,1\%$.

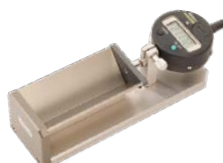

REF EMI 200

Misuratore dell'espansione
Tipo digitale, con orologio digitale e precisione di $0,01 \text{ mm} \pm 0,1\%$.



REF EMI 300

Kit PC misuratore dell'espansione
Tipo digitale, con orologio digitale e precisione di $0,01 \text{ mm} \pm 0,1\%$. Uscita USB.

Per la documentazione automatica del comportamento di espansione del gesso in più ore. Registrazione della misura per intervallo di tempo o step di espansione. Ulteriore semplice elaborazione in un programma di fogli di calcolo per la rappresentazione grafica.

Indicatore della posizione mandibolare

REF MPI 301



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF MPI 316M



per sistema di basette magnetiche MPS

REF MPI 120

Etichette di registrazione/
Blocco referti per MPI(15 fogli) con 6 etichette cad. e
blocco referti DIN A5 di 25 fogli.

MPI - Strumento per il controllo delle superfici occlusali, per misurare gli spostamenti condilari sull'articolatore e per la comparazione con le registrazioni di centrica con 15 fogli contenenti 6 etichette cad.e blocco (MPI 110).

Condymeter III analogico/digitale

REF MPI 400



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF MPI 500



REF MPI 415M



per sistema di basette magnetiche MPS

REF MPI 515M



Strumenti per la ricerca scientifica e la misurazione tridimensionale a livello dell'articolazione temporo-mandibolare, con precisione di 0,01 mm, completo di blocco d'aggiustamento e valigia da trasporto.

Variatore della posizione mandibolare III standard/Plus

REF MPV 500



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF MPV 550



REF MPV 515M



per sistema di basette magnetiche MPS

REF MPV 516M



Articolatori speciali sulla base del SAM 3, con guide incrociate indicato al posto delle ceste condilari per il preciso riposizionamento lineare dei condili ad es. nei casi di splintaggio. Versione Plus per la produzione di bite block, con possibilità di regolazione precisa grazie al display Vernier.

Variatore della posizione mandibolare III +15 MKG/+15 MKG Plus

REF MPV 560



per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)

REF MPV 550



REF MPV 575M



per sistema di basette magnetiche MPS

REF MPV 516M



Articolatori speciali sulla base del SAM 3, con guide incrociate indicato al posto delle ceste condilari per il preciso riposizionamento lineare dei condili, rialzati di 15 mm. Versione Plus per la produzione di bite block, con possibilità di regolazione precisa grazie al display Vernier.



REF MPV 502

Kit regolazione di lateralità per MPV III
Spostamento trasversale fino a 3 mm,
montaggio successivo a richiesta.



Anteprima del set
di regolazione laterale



Senza regolazione
laterale

I nostri esperti raccomandano il Modello III - Plus e MKG per un uso più versatile.

	REF-Nr.	Sistema di fissaggio modello (Basetta di montaggio)		Altezza		Possibilità di regolazione	
		Vite / ASP	MPS	Standard	Standard +15mm	2D (asse X e Z)	3D (asse X, Y e Z)
STANDARD	REF MPV 500	✓		✓		✓	
	REF MPV 515M		✓	✓		✓	
MKG	REF MPV 560	✓			✓	✓	
	REF MPV 575M		✓		✓	✓	
PLUS	REF MPV 550	✓		✓			✓
	REF MPV 565M		✓	✓			✓
MKG PLUS	REF MPV 580	✓			✓		✓
	REF MPV 595M		✓		✓		✓

ALTEZZA E POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE

STANDARD (2D)

Elemento sup. standard
Asse X: = +/- 10 mm,
Asse Z: = +/- 10 mm

MKG (2D)

Elemento sup. +15 mm
Asse X: = +/- 10 mm,
Asse Z: = +/- 10 mm

PLUS (3D)

Elemento sup. standard
Asse X: = +15,0/- 5,0 mm,
Asse Z: = +15,0/- 5,0 mm,
Asse Y: = +/- 3,0 mm

MKG PLUS (3D)

Elemento sup. +15 mm
Asse X: = +15,0/- 5,0 mm,
Asse Z: = +15,0/- 5,0 mm,
Asse Y: = +/- 3,0 mm

Starter kit per ortodonzia

	Versione basette avvitabili	Versione basette magnetiche MPS
	REF KIT 105S	REF KIT 105M
	REF ART 120	REF MPS 150
REF ART 500	✓	
REF ART 515M		✓
REF MPI 301	✓	
REF MPI 316		✓
REF ATB 338		✓
REF ATB 339	✓	
REF ATB 395	✓	✓
REF ATB 336	✓	✓
REF ATB 395	✓	✓
REF ATB 303+394	✓	✓
REF ATB 240	✓	✓
REF ATB 398	✓	✓
REF ART 391	✓	✓
REF MOH 560	✓	✓
REF ART 599	✓	✓

REF ART 500

Articolatore SAM 3 Basic

REF ART 515M

Articolatore SAM 3 Basic

REF ART 120Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2**REF MPS 150**Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2**REF MPI 301**Indicatore posizione mandibolare
per basette avvitabili**REF MPI 316**Indicatore posizione mandibolare
per basette magnetiche**REF ATB 338**Base magnetica per supporto
telescopico, MPS**REF ATB 339**Base magnetica per supporto
telescopico**REF ATB 336**Supporto forchetta
telescopico**REF ATB 395**Gruppo forchetta AX
completo**REF ATB 303 + 394**Arco AXIOQUICK III +
supporto nasale AX - S**REF ATB 240**Copri-olive auricolari
(3x6 pz)**REF ATB 398**

Supporto di trasferimento AX

REF ART 391

CEPH Template

REF MOH 560Aiuto di montaggio con
30 astine elastiche**REF ART 599**

Valigia da trasporto

CEPH Template

Il CEPH Template è stato sviluppato come strumento per l'implementazione pratica dell'analisi Hasund. Il CEPH Template è facile da gestire. I dati presenti vengono visualizzati graficamente e quindi possono essere interpretati in modo rapido e precoce.





	SNA	NL-NSL	NSBa	ML-NSL	SNB	ML-NL
62		141	43	64	28	
63	14	140	42	65		
64		139	41	66	27	
65	13	138	40	67		
66		137	39	68	26	
67	12	136	38	69		
68		135	37	70	25	
69	11	134	36	71		
70		133	35	72	24	
71	10	132	34	73		
72		131	33	74	23	
73	9	130	32	75		
74		129	31	76	22	
75	8	128	30	77		
76		127	29	78	21	
77	7	126	28	79		
78		125	27	80	20	
79	6	124	26	81		
80		123	25	82	19	
81	5	122	24	83		
82		121	23	84	18	
83	4	120	22	85		
84		119	21	86	17	
85	3	118	20	87		
86		117	19	88	16	
87	2	116	18	89		
88		115	17	90	15	
89	1	114	16	91		
90		113	15	92	14	
91	0	112	14	93		
92		111	13	94	13	
93		110	12	95		
94		109	11	96	12	
95		108	10	97		
96		107	9	98		
97		106	8	99		
98		105	7	100		
99		104	6	101		
100		103	5	102		
101		102	4	103		
102		101	3			
103		100	2			
104		99	1			
105		98	0			

measuring • marking • setting • monitoring

Order-Nr. ART 391
PRÄZISIONSTECHNIK GmbH
Fussbergstrasse 1 • 82131 Gauting
www.sam-dental.de


Lato anteriore del CEPH Template:

- harmony-box con valori cardinali basali, intervallo di classificazione del tipofacciale (retrognatico, ortognatico, prognatico),
- griglia mobile con limiti di tolleranza (TG),
- linea super armonica (SHL),
- campo giallo su SHL (NL-NSL) marcatura dell'intervallo di classificazione verticale/basale (1,2,3) su ML-NSL
- scala di misurazione.

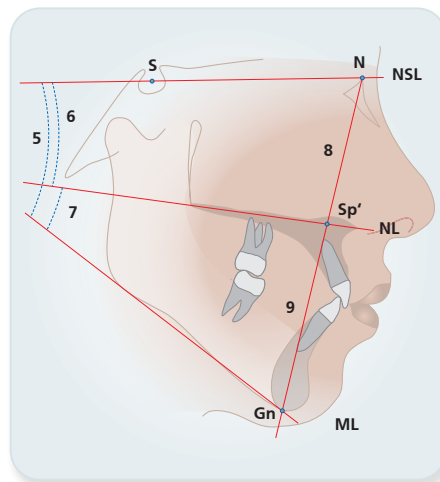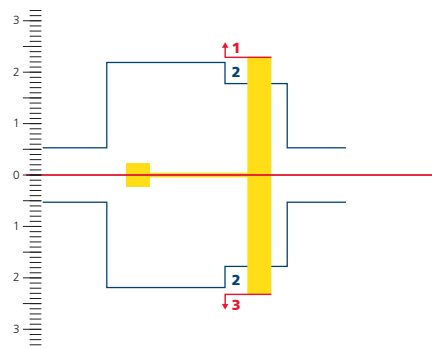

Lato posteriore del CEPH Template:

- tabella con valori medi per supportare la prognosi dell'angolo ANB e la prominenza del mento a fine trattamento,
- nomogramma per l'analisi della posizione degli incisivi inferiori,
- nomogramma per l'analisi dei tessuti molli.

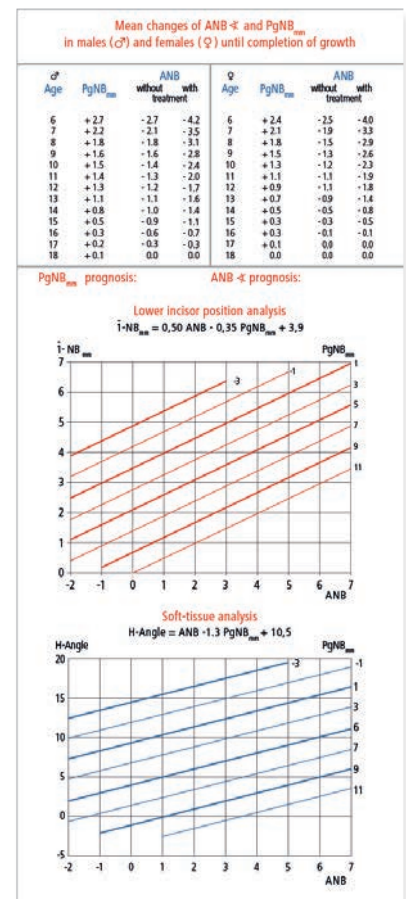

REF ART 391




CEPH Template

Incluse le modalità d'uso con descrizione dell'analisi di HASUND.

Strumento 3D di misurazione punti di repere

I SAM RMI 500/550 permettono la simultanea misurazione tridimensionale di modelli montati, sia superiore che inferiore. Per il confronto dei punti corrispondenti nell'occlusione o sulla cresta alveolare, l'ottimizzazione della posizione dei monconi implantari e la documentazione. Lo strumento di misurazione 3D è disponibile in versione meccanica (RMI 500) e in versione elettronica (RMI 550). Connessione a PC su richiesta.

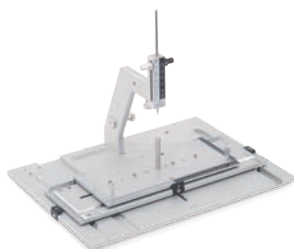

REF RMI 500

Versione meccanica



REF RMI 550

Versione digitale + analogica

Kit MRI II articolatore H

Il SAM 3 H offre ancora più spazio durante il montaggio del modello (ART 560 / ART 575M) e per lo strumento di riposizionamento del modello (MRI 300). Per il contenuto Pag. 65.



REF MRI 351K

per sistema di basette avvitabili e sistema AXIOSPLIT (Pag. 51)



REF MRI 366MK

sistema di basette magnetiche



REF MRI 220K

Kit tasselli MRI in plastica

Contiene uno strumento per tasselli (MRI 212), una fresa per tasselli (MRI 211) e 200 tasselli (MRI 210).



REF MRI 300

Strumento di riposizionamento modelli

Con kit tasselli MRI II (MRI 220K).

Il MRI è stato sviluppato in collaborazione con il Prof. Dr. med. dent. Rainer Schweska-Polly (Università di Hannover) e viene utilizzato per la pianificazione chirurgica nella chirurgia maxillo-facciale per il riposizionamento tridimensionale del modello superiore o inferiore.

Kit chirurgici

	Kit MRI II articolatore - H		Kit MRI II articolatore - SAM 3 H		Kit MRI II articolatore - SAM 3 XL	
	REF MRI 351K	REF MRI 366MK	REF MRI 330K	REF MRI 345MK	REF MRI 370SK	REF MRI 370MK
	REF ART 120	REF MPS 150	REF ART 120	REF MPS 150	REF ART 120	REF MPS 150
REF ART 560	✓		✓			
REF ART 575M		✓		✓		
REF ART 562					✓	
REF ART 577M						✓
REF ATB 339			✓		✓	
REF ATB 338				✓		✓
REF ATB 336			✓	✓	✓	✓
REF MRI 300	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REF ATB 398			✓	✓	✓	✓
REF ATB 395			✓	✓	✓	✓
REF ATB 303+394			✓	✓	✓	✓
REF ATB 240			✓	✓	✓	✓
REF MOH 560			✓	✓	✓	✓
REF ART 599			✓	✓	✓	✓

REF ART 560



Articolatore SAM 3 + 15 mm
con basette avvitabili

REF ART 575M



Articolatore SAM 3 + 15 mm
con basette magnetiche MPS

REF ART 562



Articolatore SAM 3 + 55 mm
con basette avvitabili

REF ART 577M



Articolatore SAM 3 + 55 mm
con basette magnetiche MPS

REF ART 120



Basette di montaggio
avvitabili gialle 20+2

REF MPS 150



Basette di montaggio
magnetiche gialle 20+2

REF ATB 339



Base magnetica per supporto
telescopico

REF ATB 338



Base magnetica per supporto
telescopico, MPS

REF ATB 336



Supporto forchetta
telescopico

REF MRI 300



Strumento di riposizionamento
modelli

REF ATB 398



Supporto di trasferimento AX

REF ATB 395



Gruppo forchetta AX
completo

REF ATB 303 + 394



Arco AXIOQUICK III +
supporto nasale AX - S

REF ATB 240



Copri-olive auricolari
(3x6 pz)

REF MOH 560



Aiuto di montaggio con
30 astine elastiche

REF ART 599



Valigia da trasporto

Codice	Descrizione	Pag.	Codice	Descrizione	Pag.
AQR 100	AXIOQUICK Recorder II	47	ART 455	Elemento superiore articolatore XL (+55)	65
AQR 150	AXIOQUICK Recorder II - AXO	47	ART 491	Indicatore piano di Stuart by Nannini	42
AQR 221	Gancio NT e fissaggio magnetico a Z	47	ART 500	Articolatore SAM 3, basette avvitabili	31
AQR 222	Cucchiaino paraocclusale magnetico a Z	47	ART 501K	Starter kit NT SAM 3, basette avvitabili	40
AQR 223	Cucchiaino occlusale magnetico a Z	47	ART 502K	Starter kit SAM 3, basette avvitabili	40
AQR 226K	Kit cucchiaino AQR	47	ART 510	Chiave di fissaggio gialla	33
AQR 300	AQR-Optic, WLAN, by Zebbris Medical	46	ART 513	Sonda 0,05 mm	33
AQR 301	Arco elettronico superiore	46	ART 515M	Articolatore SAM 3, basette magnetiche	31
AQR 302	Sensore inferiore	46	ART 516MK	Starter kit NT SAM 3, basette magnetiche	40
AQR 304	Arco C con puntatore	46	ART 517MK	Starter kit SAM 3, basette magnetiche	40
AQR 305	Cucchiaino paraocclusale inferiore	46	ART 520	Asta incisale IIIP, completa	33
AQR 306	Adattatore occlusale	46	ART 520R	Asta incisale III reverse, completa	33
AQR 307	Attacchi occlusali monouso (3 pz)	46	ART 525	Antenna superiore	33
AQR 308	Forchetta tipo SD	46	ART 526	Antenne posteriori	33
AQR 309	Adattatore forchetta SD	46	ART 530	Viti di protrusione / retrusione	32
ART 114	Viti di fissaggio basette (2 pz)	52	ART 531	Articolatore SAM 3 con prot., basette avvitabili	32
ART 120	Basette di montaggio avvitabili (20 pz)	52	ART 533	Asta incisale IIIPM, micro regolabile, completa	33
ART 124	Basette di montaggio avvitabili BP (100 pz)	52	ART 535	Coperture ceste condilari per SAM 3	31
ART 150	Guide di Bennett bianche	27	ART 539	Guide di Bennett 3 in metallo per SAM 3	31
ART 170	Assortimento guide di Bennett I	27	ART 541	Inseriti piani-guida a curvatura 1 bianchi	29
ART 176	Guide di Bennett verdi	27	ART 542	Inseriti piani-guida a curvatura 2 verdi	29
ART 177	Guide di Bennett blu	27	ART 543	Inseriti piani-guida a curvatura 3 rossi	29
ART 178	Guide di Bennett rosse	27	ART 545	Guide di Bennett II verdi in metallo	31
ART 180	Assortimento inserti di protrusione	27	ART 546M	Articolatore SAM 3 con prot., basette magnetiche	32
ART 181	Inseriti di protrusione bianchi 1 mm	27	ART 548	Set inserti di Bennett e piani-guida 3	31
ART 182	Inseriti di protrusione gialli 2 mm	27	ART 550	Articolatore SAM 3 Prof., basette avvitabili	32
ART 183	Inseriti di protrusione verdi 3 mm	27	ART 551K	Kit SAM 3 Professional, basette avvitabili	41
ART 184	Inseriti di protrusione rossi 4 mm	27	ART 552K	Kit articolatore SAM 3 Prof. basette avvitabili	41
ART 185	Inseriti di protrusione blu 5 mm	27	ART 560	Articolatore SAM 3 + 15 impl., basette avvitabili	32
ART 186	Inseriti di protrusione neri 6 mm	27	ART 562	Articolatore SAM 3 + 55 MKG, basette avvitabili	65
ART 187	Kit di verifica e regolazione	33	ART 565M	Articolatore SAM 3 Prof., basette avvitabili	32
ART 187002	Cacciavite	33	ART 566MK	Kit NT SAM 3 Prof., basette magnetiche	41
ART 193	Lubrificante per metallo (5 g)	33	ART 567MK	Kit articolatore SAM 3 Prof., basette magnetiche	41
ART 225	Ceste condilari curvatura 1 (leggera)	27	ART 575M	Articolatore SAM 3 + 15 impl., basette magnetiche	32
ART 230	Ceste condilari curvatura 2 (media)	27	ART 581	Anelli guida sec. Gutowski	31
ART 235	Ceste condilari curvatura 3 (accentuata)	27	ART 591	Kit AXIOSPLINT GS	42
ART 245	Vite di bloccaggio centrica per SAM 2C e 2P	27	ART 600	Articolatore SAM SE, basette avvitabili	23
ART 260	Piatto incisale, regolabile	33	ART 601K	Kit NT articolatore SAM SE, basette avvitabili	34
ART 275	Piatto incisale, piatto	33	ART 602K	Kit AX articolatore SAM SE, basette avvitabili	34
ART 290001	Chiave a brugola 1,5 mm	33	ART 615M	Articolatore SAM SE, basette magnetiche	23
ART 290002	Chiave a brugola 2,5 mm	33	ART 616MK	Kit NT articolatore SAM SE, basette magnetiche	34
ART 300	Articolatore SAM 2P, basette avvitabili	27	ART 617MK	Kit AX articolatore SAM SE, basette magnetiche	34
ART 301K	Starter kit I NT SAM 2P, basette avvitabili	36	ART 620	Asta incisale SE, completa	33
ART 304K	Starter kit I AX SAM 2P, basette avvitabili	36	ART 625	Asta incisale NEO	35
ART 315M	Articolatore SAM 2P, basette magnetiche	27	ART 650S	Articolatore SAM NEO, basette avvitabili	25
ART 316MK	Starter kit I NT SAM 2P, basette magnetiche	36	ART 650M	Articolatore SAM NEO, basette magnetiche	25
ART 319MK	Starter kit I AX SAM 2P, basette magnetiche	36	ART 651MK	Kit NT articolatore SAM NEO, basette magnetiche	35
ART 322K	Starter kit II NT SAM 2P, basette avvitabili	37	ART 651SK	Kit NT articolatore SAM NEO, basette avvitabili	35
ART 323K	Starter kit II AX SAM 2P, basette avvitabili	37	ART 652MK	Kit AX articolatore SAM NEO, basette magnetiche	35
ART 337MK	Starter kit II NT SAM 2P, basette magnetiche	37	ART 652SK	Kit AX articolatore SAM NEO, basette avvitabili	35
ART 338MK	Starter kit II AX SAM 2P, basette magnetiche	37	ASM 100	Kit SAM AXIOSNAPMOUNT	14
ART 368	Indicatore piano occlusale 3D	42	ASM 100SK	Starter kit SAM AXIOSNAPMOUNT	14
ART 385	Kit indicatore piano occlusale	42	ASM 100AK	Professional kit SAM AXIOSNAPMOUNT - Apple	14
ART 385JK	Kit indicatore piano occlusale JK	42	ASM 100WK	Professional kit SAM AXIOSNAPMOUNT - Windows	14
ART 391	CEPH Template	63	ASM 101	Kit conversion anello adesivo, basette magnetiche	15
ART 393	Strumento impronta denti anteriori IDEA	42	ASM 102	Kit conversione, anello filettato	15
ART 394	Strumento valutazione denti anteriori IP	42	ASM 103	Supporto AxioSnapMount	15
ART 396	Zoccolo di prova split-cast, in plastica	33	ASM 120	Basette di montaggio ASM - standard (20 pz)	14
ART 398	Strumento standardizzazione articolatori	33	ASM 121	Basette di montaggio ASM - plus 2,5 mm (20 pz)	14
ART 400	Articolatore SAM 2PX, basette avvitabili	29	ASM 122	Basette di montaggio ASM - plus 5,0 mm (20 pz)	14
ART 401K	Starter kit NT SAM 2PX, basette avvitabili	38	ASM 123	Basette di montaggio ASM - plus 7,5 mm (20 pz)	14
ART 402K	Starter kit I AX SAM 2PX, basette avvitabili	38	ASM 125	Kit basette di montaggio ASM (20 pz cad.)	15
ART 415M	Articolatore SAM 2PX, basette magnetiche	29	ASM 225	Blocco distanziatore U25 (blu)	15
ART 416MK	Starter kit NT SAM 2PX, basette magnetiche	38	ASM 235	Blocco distanziatore U35 (nero)	15
ART 417MK	Starter kit I AX SAM 2PX, basette magnetiche	38	ASM 245	Blocco distanziatore U45 (oro)	15
ART 422K	Professional kit NT SAM 2PX, basette avvitabili	39	ASM 255	Blocco distanziatore U55 (rosso)	15
ART 423K	Professional kit AX SAM 2PX, basette avvitabili	39	ASM 315	Blocco distanziatore L15 (rosso)	15
ART 435	Coperture ceste condilari per 2PX	29	ASM 325	Blocco distanziatore L25 (blu)	15
ART 437MK	Professional kit NT SAM 2PX, basette magnetiche	39	ASM 335	Blocco distanziatore L35 (nero)	15
ART 438MK	Professional kit AX SAM 2PX, basette magnetiche	39	ASM 345	Blocco distanziatore L45 (oro)	15
ART 439	Guide di Bennett PX, in metallo	29	ASP 350	AXIOSPLIT strumento di riferimento centrica II	53
ART 440	Set guide di Bennett e piani-guida PX	29	ASP 420	AXIOSPLIT basette di montaggio ovali (20 pz)	53
ART 445	Guide di Bennett verdi per SAM 2PX	29	ASP 422	AXIOSPLIT basette di montaggio ovali BP (100 pz)	53
ART 446	Guide di Bennett blu per SAM 2PX	29	ASP 425	AXIOSPLIT basette di montaggio tonde (20 pz)	53
ART 447	Guide di Bennett rosse per SAM 2PX	29	ASP 427	AXIOSPLIT basette di montaggio tonde (100 pz)	53
ART 450	Elemento superiore articolatore H (+15)	32	ASP 445	AXIOSPLIT adattatore	32

Codice	Descrizione	Pag.	Codice	Descrizione	Pag.
ASP 451	AXIOSPLIT doppia base con anello	53	MPI 316M	IMPI., basette magnetiche	60
ASP 509K	AXIOSPLIT Starter Kit N, magnete standard	51	MPI 400	Condymeter III analogico, basette avvitabili	60
ASP 510K	AXIOSPLIT Starter Kit S, super magnete	51	MPI 415M	Condymeter III analogico, basette magnetiche	60
ASP 514K	AXIOSPLIT Kit articolatore N, magnete standard	51	MPI 500	Condymeter III digitale, basette avvitabili	60
ASP 515K	AXIOSPLIT Kit articolatore S, super magnete	51	MPI 515M	Condymeter III digitale, basette magnetiche	60
ASP 529	AXIOSPLIT basetta sup. N, magnete standard	51	MPS 100K	MPS Starter Kit giallo	54
ASP 530	AXIOSPLIT basetta sup. S, super magnete	51	MPS 101K	MPS kit di conversione articolatore, giallo	54
ASP 539	AXIOSPLIT basetta inf. N, magnete standard	51	MPS 150	MPS basette di montaggio, gialle (20 pz)	54
ASP 540	AXIOSPLIT basetta inf. S, super magnete	51	MPS 155	MPS basette di montaggio, gialle BP (100 pz)	54
ASP 590	Portamodelli basculabile	51	MPS 200K	MPS Starter kit grigio I	55
ATB 235	Indicatore di repere	45	MPS 201K	MPS kit di conversione articolatore grigio I	55
ATB 240	Copri-olive auricolari	45	MPS 220K	MPS Starter kit GK grigio III	55
ATB 303	AXIOQUICK arco anatomico di trasferimento III	45	MPS 221K	MPS kit di conversione articolatore grigio III	55
ATB 304	Supporto nasale regolabile verticalmente	45	MPS 250	MPS basette di montaggio, grigie (20 pz)	55
ATB 305	Gruppo forchetta I-NT, completo	45	MPS 255	MPS basette di montaggio, grigie BP (100 pz)	55
ATB 309	Supporto nasale - JSM	45	MPS 311	Adattatore II basette di montaggio magnetiche	32
ATB 325	Forchetta NT	45	MPV 500	MPV III, per basette avvitabili	60
ATB 326	Adattatore per forchetta NT	45	MPV 502	Kit regolazione di lateralità x MPV III	61
ATB 334	Supporto in acrilico XL	56	MPV 515M	MPV III - Standard, basette magnetiche	60
ATB 336	Supporto telescopico	56	MPV 550	MPV III - PRO, basette avvitabili	60
ATB 338	Base magnetica per supporto telescopico, MPS	56	MPV 560	MPV III - MKG, basette avvitabili	61
ATB 339	Base magnetica per supporto telescopico, ART	56	MPV 565M	MPV III - PRO, basette magnetiche	60
ATB 350K	AXIOQUICK Kit arco di trasferimento III - NT	44	MPV 575M	MPV III - MKG, basette magnetiche	61
ATB 386	Forchetta AX-P	45	MPV 580	MPV III - MKG - PRO, basette avvitabili	61
ATB 390K	AXIOQUICK Kit arco di trasferimento - AX	44	MPV 595M	MPV III - MKG - PRO, basette magnetiche	61
ATB 394	Supporto nasale AX - S	45	MRI 220K	Kit tasselli MRI	64
ATB 395	Gruppo forchetta AX - AXIOMATIC	45	MRI 300	Strumento di riposizionamento modelli	64
ATB 396	Forchetta AX	45	MRI 330K	Kit artic. MRI II, SAM 3 H, basette avvitabili	65
ATB 397	Supporto di trasferimento SE	57	MRI 345MK	Kit artic. MRI II, SAM 3 H, basette magnetiche	65
ATB 398	Supporto di trasferimento AX	57	MRI 351K	Kit articolatore H MRI II, basette avvitabili	65
ATB 453K	Supporto di trasf. ,P x Panadent (basso)	57	MRI 366MK	Kit articolatore H MRI II, basette magnetiche	65
ATB 455K	Supporto di trasf., WM 8 x WhipMix serie 8000	57	MRI 370SK	Kit artic. H MRI II SAM 3 XL, basette avvitabili	65
ATB 457K	Supporto di trasferimento 2C	57	MRI 370MK	Kit artic.H MRI II SAM 3 XL, basette magnetiche	65
ATB 461K	Supporto di trasferimento, D x Denar	57	MSF 100K	Kit combinato sistema splicast magnetico	58
ATB 462K	Supporto di trasferimento, G x Girschbach	57	MSF 102	UG-Sep flacone rifornimento (500 ml)	58
ATB 464K	Supporto di trasf., K x KaVo Protar ed EVO	57	MSF 105	UG-Sep flacone spray (50 ml)	58
ATB 466K	Supporto di trasf., H x Hanau Modular, Wide-Vue.	57	MSF 110	Bottoni ritentivi con scanalatura	58
ATB 473K	Supporto di trasferimento WM2PH	57	MSF 120	Porta-magneti	58
ATB 475K	Supporto di trasf., WM 3 x WhipMix Serie 3000	57	MSF 121	Magneti per MSF	58
ATB 477K	Supporto di trasferimento, ST1 x Stratos 100	57	MSF 150K	Mini kit MSF per studenti	58
ATB 481K	Supporto di trasf., D3 x Denar Serie 300	57	MSF 200K	Kit split-cast magnetico standard, rosso	58
AXO 105	Righello in acciaio x AXIOGRAPH, 200 mm	50	MSF 250K	Kit split-cast magnetico reciproco, nero	58
AXO 110	Fogli di registrazione x AXIOGRAPH	50	MSF 300K	Kit split-cast magnetico piccolo, giallo	58
AXO 111	Etichette di registrazione verdi	50	MSF 350K	Kit split-cast magnetico XL, verde	58
AXO 112	Etichette millimetriche rosse	50	MSF 450K	Kit di boxaggio XL, verde	58
AXO 220	Cucchiaino di registrazione N	50	MSF 503	Frese AXIOPIN 1,6 mm	59
AXO 222	Adattatore paraocclusale	50	MSF 504	Perni conici per ceramica	59
AXO 334	Adattatore paraocclusale AXIODAPT	50	MSF 509	AXIOPIN rifornimento perni/guaine (1000 pz cad.)	59
AXO 340K	Kit adattatore articolatore	50	MSF 510	AXIOPIN perni/guaine in AXIOBOX (1000 pz cad.)	59
AXO 350	Gancio mandibolare edentulo	50	MSF 511	AXIOPIN, solo perni (1000 pz)	59
AXO 461	Adattatore gruppo forchetta AXIOGRAPH III	50	MSF 512	AXIOPIN, solo guaine (1000 pz)	59
AXO 501K	Kit AXIOGRAPH III	49	MSF 513	AXIOPIN BP (10000 pz cad.)	51
AXO 503	Lubrificante	50	MSF 520K	Starter Kit perni/guaine AXIOPIN	59
AXO 505	Cera di indicazione occlusale	50	MSF 526	Starter Kit DISPOSPLIT	58
AXO 516MK	Kit AXIOGRAPH III, MPS	49	MSF 527	DISPOSPLIT conf. laboratorio, bianco	58
AXO 530	Disp. montaggio asse cerniera, basette avvitabili	50	MSF 600	Axiodrill II foragessi, 230 Volt	59
AXO 545M	Disp. montaggio asse cerniera, basette magnetiche	50	REP 003	Servizio di incisione individuale	43
AXP 100S	AXIOPRISA Starter set	12	RMI 500	Strumento misuraz. punti repere 3D, meccanico	64
AXP 100K	kit arco di trasferimento AXIOPRISA	12	RMI 550	Strumento misuraz. punti repere 3D, elettronico	64
AXP 100AK	kit arco di trasferimento AXIOPRISA, Apple	12			
AXP 100WK	kit arco di trasferimento AXIOPRISA, Windows	12			
AXP 101XS	Rifornimento AXIOJIG - XS (10 pezzi)	12			
AXP 101S	Rifornimento AXIOJIG - S (20 pezzi)	12			
AXP 101m	Rifornimento AXIOJIG - M (100 pezzi)	12			
AXP 101L	Rifornimento AXIOJIG - L (500 pezzi)	12			
EMI 100	Strum. misurazione espansione, analogico	59			
EMI 200	Strum. misurazione espansione, digitale	59			
EMI 300	Strum. misurazione espansione, kit digitale PC	59			
KIT 105S	Kit SAM 3 x ortodonzia, basette avvitabili	62			
KIT 105M	Kit SAM 3 x ortodonzia, basette magnetiche	62			
MOH 124	Astine elastiche per blocca-modelli	56			
MOH 560	Aiuto di montaggio	62			
MOH 700	Strumento di montaggio II, basette avvitabili	33			
MOH 715M	Strumento di montaggio II, basette magnetiche	33			
MPI 120	Etichette registrazione/Blocco referti x MPI	60			
MPI 301	MPI, basette avvitabili	60			



Distributore esclusivo per l'Italia:

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it